


veterinary technology for life
Eickemeyer®

promo
smart veterinary savings

www.eickemeyer.de

Telefon +49 7461 96 580 0

JETZT
STEUERN
SPAREN

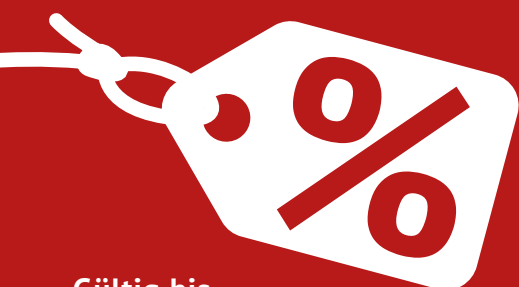

**Investitionsbooster
2025**

Gültig bis
18.01.2026

Steuervorteile 2025 – Ihre Chance, jetzt zu investieren

Mit dem neuen Gesetz für ein **steuerliches Investitionssofortprogramm** unterstützt der Staat gezielt Unternehmen bei größeren Anschaffungen. Es können bereits im ersten Jahr bis zu **30 % der Anschaffungskosten** steuerlich geltend gemacht werden.

Bei EICKEMEYER® **profitieren Sie doppelt**: Unsere Investitionsangebote sind **stark preisreduziert** und durch die zusätzlichen **Steuervorteile** wird Ihre Anschaffung noch attraktiver. Ob modernste Ultraschallgeräte oder hochwertige OP-Ausstattung: Jetzt investieren Sie zu besonders vorteilhaften Konditionen.

Sichern Sie sich den **dreifachen Mehrwert**: Geringere Kosten, Steuern senken und Ihre Praxis mit Qualitätsprodukten von EICKEMEYER® zukunftssicher ausstatten.

EICKEMEYER® NARKOVET® II NARKOSEGERÄT

Ihre Lösung für die veterinärmedizinische Anästhesie

Das EICKEMEYER® NarkoVet® II wurde speziell für die Anforderungen der Veterinärmedizin entwickelt. Dieses kompakte Gerät der neuesten Generation überzeugt durch einen klar strukturierten Aufbau aller Komponenten und erleichtert die Bedienung erheblich.

- ▶ Flowmeter (0,1 – 4,0 l/min)
- ▶ Sauerstoff-Bypass für sofortige Sauerstoffzufuhr
- ▶ Isofluran-Verdampfer mit Key-Filler
- ▶ CO₂ Absorberkalkbehälter mit Schnellwechselsystem
- ▶ Stufenlos regulierbares Überdruckventil
- ▶ Manometer zur Anzeige des Systemdrucks
- ▶ Einfacher Wechsel der Kreisläufe per Kippschalter
- ▶ Aufhängevorrichtung für Patientenschläuche
- ▶ Inkl. Tablett für O₂-Konzentrator, Patientenschläuche (koaxial/offen), Atembeutel (0,5 l, 1 l & 2 l) und Narkosegasfilter mit Halterung und Abluftschlauch

213130

~~€ 2.995,-~~

€ 2.495,-

Leasing* € 2,17 pro Tag für 48 Monate

Wandhalterung für NarkoVet® II

Mit der Wandhalterung kann das NarkoVet II platzsparend an der Wand montiert werden.

21313002

€ 120,-

Aufsatztablett für NarkoVet® II

- ▶ Für Überwachungsmonitore
- ▶ Maße (in cm): 29,5 x 19,5

21313003

€ 50,-

Starterset für NarkoVet® II

Set komplett, bestehend aus:

- ▶ Sicherheitseinfüllstutzen für Isofluran
- ▶ 3 x Atemkalk, 4,5 l, mit Farbumschlag
- ▶ Atembeutel, 3 l
- ▶ 6 Atemmasken aus Kunststoff (Gr. 1 – 6)
- ▶ EickTube Trachealtuben-Set mit 23 Tuben
- ▶ Laryngoskop ECONOMY

213131

€ 495,-

Installation & Einweisung

S213130

€ 550,-



AKTION

NarkoVet® II	€ 2.995,-
+ Starterset	€ 495,-
+ OxyVet IV	€ 669,-
A21313001	€ 4.159,-

€ 3.495,-

Leasing* € 2,98 pro Tag, 48 Monate

**GESPART
16 %**

EICKEMEYER® NARKOVET® SAV II BEATMER FÜR KLEINTIERE

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Die Hauptursache schwerer Narkosezwischenfälle in Tierarztpraxen ist die unbemerkte Apnoe des Patienten. Eine routinemäßig kontrollierte Beatmung hilft, dieses Narkoserisiko drastisch zu minimieren und sorgt so für die optimale Sicherheit Ihrer Patienten. Die Beatmung wird über eine elektronische Hochleistungsturbine realisiert, wodurch kein Antriebsgas (z. B. von einem externen Kompressor) benötigt wird. Die Einstellung des NarkoVet® SAV II ist äußerst benutzerfreundlich, es muss nur das Körpergewicht des Patienten eingestellt werden und die intelligente Software passt alle weiteren Beatmungsparameter automatisch an.

- ▶ Es können Patienten von 0,4 – 150 kg beatmet werden
- ▶ Automatische Berechnung des Beatmungsvolumens nach Gewicht
- ▶ Beatmungsmodi: Volumenkontrollierte Beatmung (VCV), Druckkontrollierte Beatmung (PCV) und positiv-endexpiratorischer Druck (PEEP)
- ▶ Alle Beatmungsparameter auf großem 7" Touchscreen sichtbar
- ▶ Patientensicherheit durch akustische und optische Alarmer
- ▶ Automatischer Systemdichtheitstest mit grafischer Anleitung
- ▶ Beatmungsfrequenz: 2 – 60 bpm
- ▶ Tidalvolumen: 4 – 1.500 ml
- ▶ Maximaler Beatmungsdruck: 5 – 50 cmH₂O
- ▶ Auslösedruck -10,0 bis -4,0 cmH₂O
- ▶ Maße (in mm): L 291 x B 336 x H 462
- ▶ Gewicht: ca. 8,5 kg

213020

~~€ 3.495,-~~

€ 2.995,-

Leasing* € 2,56 pro Tag für 48 Monate



GESPART

22 %

AKTION

NarkoVet® SAV II	€ 3.495,-
+ NarkoVet® II	€ 2.995,-
+ Starterset	€ 495,-
+ OxyVet IV	€ 669,-

A21312001 ~~€ 7.654,-~~

€ 5.995,-

Leasing* € 5,03 pro Tag, 48 Monate

SAUERSTOFFKONZENTRATOR OXYVET IV

Sauerstoffkonzentrator für den Einsatz bei der Sauerstofftherapie und Anästhesie.

- ▶ Ersparnis von Kosten und Aufwand: Keine Sauerstoffflasche benötigt, geringerer Stromverbrauch
- ▶ Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- ▶ Hohe Patientensicherheit durch optische und akustische Alarmer
- ▶ Geräuscentwicklung: ≤ 55 dB(A)
- ▶ Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 0,5 – 5 l/min
- ▶ Ausgabe von bis zu 93 % Sauerstoff (± 3 %)
- ▶ Inkl. Sprudelbefeuchter und O₂-Schlauch
- ▶ Maße (in cm): L 34 x B 37 x H 67
- ▶ Gewicht: 15,3 kg

213180

~~€ 669,-~~

€ 549,-



EICKEMEYER® NARKOVET® PRO KLEINTIER NARKOSEGERÄT

Maximale Sicherheit für Ihre Patienten

In der Kleintiermedizin ist unbemerkte Apnoe die Hauptursache schwerer Narkosezwischenfälle. Eine routinemäßig kontrollierte Beatmung minimiert dieses Risiko drastisch und gewährleistet die optimale Sicherheit Ihrer Patienten.

Narkosegerät

- ▶ Flowmeter (0,1 – 4,0 l/min)
- ▶ Isofluran- bzw. Sevofluran-Verdampfer mit Selectatec-Anschluss und Key-Filler
- ▶ Sauerstoff-Bypass (O₂-Flush)
- ▶ CO₂ Absorberkalkbehälter mit Schnellwechselsystem
- ▶ Stufenlos regulierbares Überdruckventil
- ▶ Manometer zur Anzeige des Systemdrucks
- ▶ Externer Frischgasausgang für offenes System
- ▶ Halter für Narkosegasfilter mit integrierter Waage

Beatmer

- ▶ Elektronisch kontrolliert, keine Druckluftquelle notwendig
- ▶ Alle Beatmungsparameter auf großem 8" Touchscreen sichtbar
- ▶ Patientensicherheit durch akustische und optische Alarmer
- ▶ Automatische Beatmungsvolumenberechnung nach Gewicht
- ▶ Es können Patienten von 0,5 – 150 kg beatmet werden
- ▶ Unterstützte Beatmungsmodi:
 - Volumenunterstützte Beatmung (VS)
 - Volumenkontrollierte Beatmung (VCV)
 - Druckkontrollierte Beatmung (PCV)
 - Synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung – Druckkontrolle (SIMV-PC)
 - Kontinuierlich positiver Luftröhrendruck / Beatmung mit Druckunterstützung (CPAP/PSV)
 - Beatmung mit druckregulierter Volumenkontrolle (PRVC)
 - Synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung – Beatmung mit druckregulierter Volumenkontrolle (SIMV-PRVC)
 - Druckunterstützter Beatmungsschutz (PSVPro)
- ▶ Beatmungsfrequenz: 4 – 100 bpm
- ▶ Tidalvolumen: 5 – 1.500 ml
- ▶ Maximaler Beatmungsdruck: 3 – 50 cmH₂O
- ▶ Auslösedruck -20,0 bis -1 cmH₂O
- ▶ Netz- und Akkubetrieb, Akkulaufzeit mind. 2 Std.

Weitere Daten

- ▶ Inkl. Aufsatztablett für Sauerstoffkonzentrator und Patientenschlauch mit 1 l Atembeutel
- ▶ Maße (in cm): L 64 x B 67 x H 140
- ▶ Gewicht: ca. 44 kg

213040/42

~~€ 7.195,-~~

€ 5.995,-

Leasing* € 5,03 pro Tag für 48 Monate

NarkoVet® PRO + Air

- ▶ Wie NarkoVet® PRO nur mit zweitem Flowmeter für Luft

213041/43

~~€ 7.995,-~~

€ 6.695,-

Leasing* € 5,61 pro Tag für 48 Monate

Intelligentes CO₂-Beatmungsmodul für NarkoVet® PRO

Das Sicherheitsupdate mit dem neuen CO₂-Modul ermöglicht eine automatisierte Anpassung der Beatmung basierend auf dem expiratorischen CO₂-Wert. Das System analysiert die CO₂-Konzentration in der Ausatemluft kontinuierlich und reguliert die Beatmungsparameter vollautomatisch. Dadurch wird nicht nur die Überwachung präziser, sondern auch die Atemunterstützung dynamisch an den aktuellen physiologischen Zustand des Patienten angepasst.

213045

€ 1.450,-

Installation & Einweisung

S213040

€ 950,-

NEU



213040

LIFEVET® CP KAPNOGRAPH MIT PULSOXIMETRIE

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Mit dem tragbaren LifeVet® CP können die expiratorische CO₂-Konzentration (EtCO₂), die Atemfrequenz (RR), die Sauerstoffsättigung (S_pO₂) sowie die Pulsfrequenz (PR) bei Hunden, Katzen und Pferden gemessen und angezeigt werden. Das Gerät ist äußerst kompakt und handlich; die Bedienung erfolgt über den großen Touchscreen-Monitor, von dem alle wichtigen Parameterinformationen leicht abgelesen werden können.

- ▶ EtCO₂ im Nebenstrom-Messverfahren
- ▶ Kurven- oder großformatige Zahlenanzeige
- ▶ 4,3" TFT Touchscreen Display mit automatischer Displaydrehung (Hoch- / Querformat)
- ▶ Anzeige EtCO₂: 0 bis 150 mmHg
- ▶ Anzeige S_pO₂: 1 bis 100 %
- ▶ Anzeige PR: 25 bis 250 bpm
- ▶ Optische und akustische Alarme
- ▶ Alarmgrenzen individuell einstellbar
- ▶ Lithium-Akku mit bis zu 18 Stunden Betriebszeit
- ▶ Inkl. CO₂-Probenschlauch, CO₂-Filter, Netzteil, USB-Kabel
- ▶ Maße (in cm): B 7,7 x H 14,1 x T 3,6
- ▶ Gewicht: 420 g

321880

~~€ 1.495,-~~

€ 1.195,-

Leasing* € 1,04 pro Tag für 48 Monate



LIFEVET® 10C ÜBERWACHUNGS- UND ANÄSTHESIEMONITOR

Der LifeVet® 10C ist ein moderner, leistungsstarker Patientenmonitor, der sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Technologie und den umfangreichen Datenspeicher auszeichnet. Durch die große Anzeige können die Vitalfunktionen auch aus größerer Entfernung problemlos abgelesen werden. Die Bedienung erfolgt bequem per Touchscreen. Schnellasten sorgen zudem für den raschen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

- ▶ Multiparameteranzeige von Atemfrequenz, Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung, Blutdruck (NIBP), EKG, Temperatur und Kapnographie (EtCO₂) im Nebenstromverfahren
- ▶ Der LifeVet® 10C+ ist zudem mit einem IBP-Modul zur invasiven Blutdruckmessung ausgestattet
- ▶ Hochauflösender 10" LED-Touchscreen mit bis zu 8 Kurven
- ▶ Frei wählbare Alarmgrenzen und 360° sichtbare Alarmanzeige
- ▶ Netz- und Akkubetrieb bis zu 4 Stunden
- ▶ Inkl. Li-Ion Akku, NIBP-Kabel mit Manschette, EKG-Kabel mit Klemmen, S_pO₂ Sensor mit Clips, Temperatursonde, CO₂ Adapter, CO₂ Kabel und Wasserfalle
- ▶ Der LifeVet® 10C+ beinhaltet zudem ein IBP Messfühlerset
- ▶ Maße (in cm): B 27 x H 22 x T 17
- ▶ Gewicht: ≤ 4,0 kg

LifeVet® 10C

321920

~~€ 2.495,-~~

€ 1.995,-

Leasing* € 1,73 pro Tag für 48 Monate

LifeVet® 10C+

321921

~~€ 2.995,-~~

€ 2.495,-

Leasing* € 2,17 pro Tag für 48 Monate



321920

INFUSOVET SP SPRITZENPUMPE

Die EICKEMEYER® InfusoVet SP ist eine Spritzenpumpe, die sich durch hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Durch die farbigen, übersichtlich angeordneten Tasten ist sie besonders einfach zu bedienen.

- ▶ 2,5" LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Kompatibel mit Standard 5, 10, 20, 30, 50 und 60 ml Spritzen
- ▶ Genaue Kontrolle der Flussrate und des Injektionsvolumens
- ▶ Hohe Patientensicherheit durch akustische Alarme
- ▶ Mit Klemme für Infusionsständer

Flussraten

- ▶ 5 ml Spritze: 0,1 – 150 ml/h
- ▶ 10 ml Spritze: 0,1 – 300 ml/h
- ▶ 20 ml Spritze: 0,1 – 600 ml/h
- ▶ 30 ml Spritze: 0,1 – 900 ml/h
- ▶ 50 ml / 60 ml Spritze: 0,1 – 1.500 ml/h

Technische Daten

- ▶ Netz- und Akkubetrieb bis zu 6 Stunden
- ▶ Spritzwasserschutz gemäß IP34
- ▶ Maße (in cm): L 33 x T 12,6 x H 11
- ▶ Gewicht: ca. 1,8 kg

402095

~~€ 695,-~~

€ 549,-

3 STÜCK
A40209503
€ 1.500,-



INFUSOVET IP II INFUSIONSPUMPE

Die fortschrittliche InfusoVet IP II Infusionspumpe vereint modernste Technologie mit einem benutzerfreundlichen Design, um die Verabreichung von Flüssigkeiten und Medikamenten sowohl präziser als auch effizienter zu gestalten.

- ▶ Benutzerfreundlich durch einfache Programmierung
- ▶ Patientensicherheit durch akustische und optische Alarme
- ▶ Auch für Bluttransfusionen geeignet
- ▶ Standfuß verhindert Abklemmen der Infusionsleitung
- ▶ Mit Klemme für Infusionsständer
- ▶ Seitlicher Stromanschluss ragt nicht in den Käfig hinein
- ▶ Für EICKEMEYER® Infusionsleitungen (Art. Nr. 402071)

Technische Daten

- ▶ Flussrate: 0,1 – 2.000 ml/h
- ▶ Volumengrenze: 0,1 – 9.999 ml
- ▶ Bolus Rate: 0,1 – 2.000 ml/h (Auto + manuell)
- ▶ Okklusionslevel: 5 Stufen wählbar (150 – 1.125 mmHg)
- ▶ Netz- und Akkubetrieb bis zu 4,5 Stunden
- ▶ Spritzwasserschutz gemäß IP44
- ▶ Maße (in cm): B 13 x H 18 x T 12 (ohne Tragegriff)
- ▶ Gewicht: < 1,2 kg

402087

~~€ 595,-~~

€ 449,-

3 STÜCK
A40208703
€ 1.200,-



EICKWARM AIR WÄRMEGERÄT FÜR KLEINTIERE

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Das EickWarm Air Warmluftgerät für Kleintiere ist äußerst leistungsstark und verteilt die warme Luft besonders gleichmäßig und geräuscharm in den optional erhältlichen Wärmematten. So wird der Patient sicher und zuverlässig vor einer Auskühlung geschützt.

- Sichere und effektive Steuerung der Körpertemperatur
- Extrem kraftvoll und dabei leise (≤55 dB)
- Temperatureinstellungen: Raumluft, 32 °C, 35 °C, 38 °C und 43 °C
- Zuverlässige Messung der Schlauchausgangstemperatur
- Drei wählbare Lüfterstufen (Air Flow)
- Mehrere Alarmpoptionen sorgen für höchste Patientensicherheit
- Mit Polklemme zur sicheren Befestigung
- Langer Wärmeschlauch (2 m) mit flexibler Befestigungsklemme
- Kompakte Maße (in cm): L 30 x B 37 x H 34
- Gewicht (inkl. Wärmeschlauch): 6,5 kg

648000

~~€ 1.195,-~~

€ 995,-



648000

Trolley für EickWarm Air

- Mit stabilen Bremsrollen und Korb
- Maße (in cm): L 41 x B 50 x H 65

648010

~~€ 249,-~~

€ 199,-

MOECK WÄRMEMATTEN

Die MOECK Wärmematten werden unter dem Patienten platziert und sorgen durch ihre drei unterschiedlichen Textilschichten für eine optimale Wärmezufuhr.

- Die Warmluft verteilt sich gleichmäßig unter dem Patienten
- Das Tier wird aktiv temperiert und druckentlastend gelagert
- Bei 60 °C waschbar und wiederverwendbar

Klein, 55 x 65 cm

648110

~~€ 219,-~~

€ 189,-

Mittel, 100 x 55 cm

648115

~~€ 259,-~~

€ 219,-



648115

MOECK Wäschenetze für Wärmematten

Um die Lebensdauer Ihrer MOECK Wärmematten zu verlängern, empfehlen wir, diese immer im Wäschenetz zu waschen.

Für kleine Wärmematte

648111

€ 14,95

Für mittlere Wärmematte

648121

€ 17,95

GESPART
18%

AKTION

EickWarm Air	€ 1.195,00
+ MOECK Matte klein	€ 219,00
+ MOECK Matte mittel	€ 259,00
+ Wäschenetz klein	€ 14,95
+ Wäschenetz mittel	€ 17,95

A648000 € 1.705,90

€ 1.395,-

Leasing* € 1,21 pro Tag, 48 Monate

OP- UND BEHANDLUNGSTISCH

Der Bestseller unter den EICKEMEYER® OP- und Behandlungstischen ermöglicht rückschonendes Arbeiten nicht nur im Stehen, sondern auch im Sitzen, da der OP-Stuhl weit unter die Tischplatte gefahren werden kann.

- ▶ Schlanke, formschöne Hubsäule aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Wartungsfreie, leichtgängige Pumphydraulik oder leiser Elektromotor
- ▶ Hub von 72–112 cm ermöglicht bequemes Behandeln oder Operieren, sitzend und stehend
- ▶ Wahlweise mit X-förmigem Unterbau oder schwerer Grundplatte aus hochwertigem Edelstahl
- ▶ 4 Gummifüße zum Nivellierungsausgleich
- ▶ Kippbar bis 90° durch stabile Kippvorrichtung, bequem mit einer Hand verstellbar
- ▶ Formschöne, tiefgezogene Edelstahlplatte mit runden Ecken
- ▶ Tischplatte in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich (50 x 130 cm oder 60 x 130 cm)
- ▶ Verfügt über eine seitliche Aufkantung und über einen Abfluss
- ▶ Geräuscharm, da mit stabiler, beschichteter Holzplatte unterfüttert und rundherum mit Silikon versiegelt
- ▶ Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- ▶ Extrem standfest

602012 / 601555

Darstellung	RAL-Wert	Farbe
		Edelstahl
	3000	Feuerrot
	6018	Gelbgrün
	5022	Nachtblau
	2001	Rotorange
	6005	Moosgrün
	4010	Telemagenta

Edelstahl

~~€ 2.295,-~~

€ 1.895,-

Leasing* € 1,65 pro Tag
für 48 Monate

Farbe

~~€ 2.395,-~~

€ 1.995,-

Leasing* € 1,73 pro Tag
für 48 Monate

Ausbindehaken

- ▶ Zum schnellen Ausbinden der Tiere mit Seilen, Binden etc.

602005

~~€ 69,-~~

€ 59,-

OP-Tischmatten

- ▶ Für 50 cm breite Tischplatte

602150

~~€ 67,-~~

€ 55,-

- ▶ Für 60 cm breite Tischplatte

602160

~~€ 67,-~~

€ 55,-

Normschienen-System

Ermöglicht schnelles, sicheres und variables Fixieren der Tiere.

- ▶ 2x Normschienen längs
- ▶ 2x Normschienen quer
- ▶ 4x Anschlussblöcke mit Schnellfixierklemmen
- ▶ 10x Fixierseile, L 1 m

605050

~~€ 495,-~~

€ 395,-

Abgerundetes Dental-Tablett


- ▶ Mit Abtropfwanne mit Gitterrost
- ▶ Wannengröße (in cm): B 50 x T 35

605102

~~€ 479,-~~

€ 395,-

ONLINE
konfigurieren

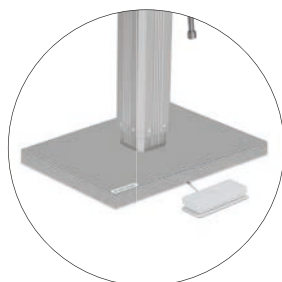

Grundplatte



X-Unterbau mit Dental-Tablett

SCHERENHUBTISCH II

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de


Schon Sie Ihren Rücken!

Der zum Untersuchen, Behandeln und Operieren geeignete Tisch ist komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Durch die elektrische Höhenverstellung von 28 bis 105 cm entfällt das Anheben der Patienten. Das schont Ihren Rücken und ermöglicht ein bequemes Arbeiten. Nivellierbare Füße sorgen immer für einen sicheren Stand.

Die seitliche Aufkantung hält Flüssigkeiten auf der Tischplatte, die durch den Ablauf entsorgt werden können. Die formschöne, tiefgezogene Tischplatte mit runden Ecken ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die mit Kunststoff abgedeckte Unterfütterung dämmt die Geräusche und erhöht die Formstabilität.

- ▶ Mit Stromanschluss und fest angeschweißten Klampen
- ▶ Maximale Traglast: 100 kg
- ▶ Maße Tischplatte (in cm): L 130 x B 60

604200

Darstellung	RAL-Wert	Farbe
		Edelstahl
	3000	Feuerrot
	6018	Gelbgrün
	5022	Nachtblau
	2001	Rotorange
	6005	Moosgrün
	4010	Telemagenta
	9010	Reinweiß

Edelstahl

~~€ 2.995,-~~

€ 2.395,-

Leasing* € 2,08 pro Tag
für 48 Monate

Farbe

~~€ 3.095,-~~

€ 2.495,-

Leasing* € 2,17 pro Tag
für 48 Monate

Zusätzliche Optionen

Konfigurieren Sie sich Ihren Tisch ganz bequem in unserem Onlineshop.

Akku Kit

- ▶ Mit Akku muss der stationäre Tisch nicht immer am Strom hängen

€ 429,-

Mobil Kit

- ▶ Mit vier Doppelrollen und einem Akku wird der stationäre Tisch mobil

€ 549,-

Elektrische Kipp-Option

- ▶ Für Tischplatte

€ 719,-

Waagen-Option

- ▶ Integrierte Waage mit Display
- ▶ Wägebereich 0 – 120 kg
- ▶ ACHTUNG: Nicht mit Kipp-Option kombinierbar!

€ 879,-

Abgerundetes Dental-Tablett

- ▶ Mit Abtropfwanne mit Gitterrost
- ▶ Wannengröße (in cm): B 50 x T 35
- ▶ Kann einfach nachgerüstet werden

604303

~~€ 479,-~~

€ 395,-



ONLINE
konfigurieren

GESPART
21 %

AKTION

Scherenhubtisch	
Edelstahl	€ 2.995,-
+ Mobil Kit	€ 549,-
Total	€ 3.544,-

€ 2.795,-

Leasing* € 2,39 pro Tag, 48 Monate

Aufpreis Farbe € 100,-

SCORE® JUMPER / AMAZONE BEHANDLUNGSTÜHLE

Die beliebten SCORE® Behandlungsstühle bringen frische Farbe in Ihre Praxis und sind zudem auch noch äußerst komfortabel. JUMPER und AMAZONE unterscheiden sich durch die Breite des Sattelsitzes.

- Bequeme, gepolsterte Sitzfläche
- Leicht abwaschbarer Kunstlederbezug
- Mittels Gasfeder höhenverstellbar von ca. 59–77 cm
- Leichtgängige PU-Doppelrollen
- Alu-Fußkreuz mit Ø 54 cm

Jeweils

~~€ 419,-~~

€ 349,-



6101010011

SCORE® JUMPER / AMAZONE Balance

Das Balance-System zeichnet sich durch eine bewegliche Sitzfläche aus. Diese passt sich dem Schwerpunkt des Oberkörpers an und unterstützt das dynamische Sitzen. Dadurch wird die Rückenmuskulatur trainiert und gekräftigt. Die Intensität kann mithilfe des Drehkreuzes – zusätzlich zur Höhenverstellung – reguliert werden. Die Balance-Stühle sind auch mit Lendenstütze erhältlich. Diese garantiert eine optimale Rückenunterstützung und eine gesunde Arbeitshaltung.

Ohne Lendenstütze

~~€ 599,-~~

€ 499,-

Mit Lendenstütze

~~€ 799,-~~

€ 679,-



6101010030

ONLINE
konfigurieren



Darstellung	Farbe
	Schwarz
	Anthrazit
	Capriblau
	Waldgrün
	Burgunderrot
	Orange
	Pink
	Ockergelb



JUMPER (breit)



AMAZONE (schmal)



Balance (beweglich)



6101010045

SCORE® MEDICAL BEHANDLUNGS- UND OP-STÜHLE

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Der SCORE® MEDICAL hat eine traditionelle, runde Sitzfläche. Mit Lendenstütze und Fußbedienung wird der MEDICAL zum vollwertigen OP-Stuhl.

- ▶ Bequeme, gepolsterte Sitzfläche mit Ø 40 cm
- ▶ Leicht abwaschbarer Kunstlederbezug
- ▶ Mittels Gasfeder höhenverstellbar von ca. 56 – 75 cm
- ▶ Leichtgängige PU-Doppelrollen
- ▶ Optimale Bewegungsfreiheit
- ▶ Alu-Fußkreuz mit Ø 54 cm

610120

~~€ 359,-~~ € 299,-

Mit Lendenstütze

- ▶ Kompakte, funktionelle Lendenstütze
- ▶ Höhe und Neigung einstellbar
- ▶ Farbe: schwarz

610190

~~€ 569,-~~ € 479,-

Mit Lendenstütze und Fußbedienung

- ▶ Stufenloses Verstellen der Sitzhöhe während der OP
- ▶ Operateur bleibt steril
- ▶ Farbe: schwarz

610195

~~€ 795,-~~ € 669,-

ONLINE
konfigurieren



Darstellung	Farbe
	Schwarz
	Anthrazit
	Capriblau
	Waldgrün
	Burgunderrot
	Orange
	Pink
	Ockergelb



61012501



610195

SCORE® ERGO SUPPORT OP-STUHL

Der SCORE® Ergo Support Stuhl wurde speziell für Ophthalmologen entwickelt. Er ermöglicht ein gesundes und komfortables Sitzen und bietet Ihnen während langer statischer Arbeiten eine verlässliche Stütze. Besondere Merkmale des SCORE® Ergo Support Stuhls sind seine ergonomisch geformten Armlehnen. Sie können dicht an den Körper gebracht werden und bieten Ihren Unterarmen so eine optimale Stütze für das Arbeiten mit ruhigen Händen. Durch die Höheneinstellung der Armlehnen können Sie aufrecht an einem Mikroskop oder einem anderen Präzisionsinstrument sitzen. Der Ergo Support hilft Ihnen, eine entspannte Sitzhaltung einzunehmen: Nacken, Schultern und Rücken werden entlastet.

- ▶ Einfache Anpassung von Höhe, Sitz- und Rückenwinkel
- ▶ SCORE® Ergo Shape Sitz mit abgerundeten Ecken
- ▶ Kompakte Lendenstütze kann einfach positioniert werden
- ▶ Starkes Aluminium-Fußkreuz mit großen Rollen
- ▶ Höhenverstellung (mit Fußbedienung): 52 – 71 cm
- ▶ Arbeitshöhe: 80 – 90 cm
- ▶ Sitzabmessungen: Ø 40 cm
- ▶ Fußkreuzabmessungen: Ø 68 cm

610060

~~€ 1.295,-~~ € 1.095,-



610060

DR. MACH LED 130 PLUS / 130 F UNTERSUCHUNGS- UND OP-LEUCHTEN

Die LED 130 zeichnet sich durch bewährte Technologie, erwiesene Zuverlässigkeit und modernes Design aus. Der „Bestseller“ von DR. MACH kann in allen Bereichen Ihrer Praxis eingesetzt werden.

- Kompakte Untersuchungs- und OP-Leuchte mit LED-Technologie
- Farbwiedergabeindex: $R_a \geq 95$
- Durchmesser des Leuchtenkörpers: 33 cm
- Anzahl der LEDs: 19
- Elektronische Helligkeitsregulierung
- Sterilisierbare Griffhülse optional (Art. Nr. 611266)
- Leistungsaufnahme: nur 28 W

DR. MACH LED 130 Plus

- 100.000 Lux Lichtleistung / 1 m Arbeitsabstand
- Fixfokus, Leuchtfeld: 12 cm / 1 m Arbeitsabstand

DR. MACH LED 130 F

- 70.000 Lux Lichtleistung / 1 m Arbeitsabstand
- Fokussierbares Leuchtfeld: 14–25 cm / 1 m Arbeitsabstand



611738

DR. MACH LED 130 Plus			
Art. Nr.	Ausführung		€
611736	Stativmodell	2.149,-	1.795,-
611737	Wandmodell	1.895,-	1.595,-
611738	Deckenmodell** bis 3 m Raumhöhe***	2.249,-	1.895,-

DR. MACH LED 130 F			
Art. Nr.	Ausführung		€
611733	Stativmodell	2.395,-	2.049,-
611734	Wandmodell	2.149,-	1.795,-
611735	Deckenmodell** bis 3 m Raumhöhe***	2.495,-	2.095,-

**BEST-
SELLER**

DR. MACH LED 150 / 150 FP OP-LEUCHTEN

Die LED 150 von DR. MACH ist eine moderne und leistungsstarke OP-Leuchte für den Einsatz in Tierarztpraxen. Die LED 150 ist mit fokussierbaren Leuchtfeld und als Fixfokus-Ausführung erhältlich.

- Kompakte Operationsleuchte mit LED-Technologie
- Farbwiedergabeindex: $R_a \geq 96$
- Durchmesser des Leuchtenkörpers: 38 cm
- Anzahl der LEDs: 26
- Elektronische Helligkeitsregulierung
- Inkl. sterilisierbare Griffhülse (Kunststoff)
- Leistungsaufnahme: nur 35 W

DR. MACH LED 150

- 110.000 Lux Lichtleistung / 1 m Arbeitsabstand
- Fixfokus, Leuchtfeld: 19 cm / 1 m Arbeitsabstand

DR. MACH LED 150 FP

- 130.000 Lux Lichtleistung / 1 m Arbeitsabstand
- Fokussierbares Leuchtfeld: 17–24 cm / 1 m Arbeitsabstand



612942

DR. MACH LED 150			
Art. Nr.	Ausführung		€
612940	Stativmodell	2.995,-	2.495,-
612941	Wandmodell	2.749,-	2.295,-
612942	Deckenmodell** bis 3 m Raumhöhe***	3.049,-	2.549,-

DR. MACH LED 150 FP			
Art. Nr.	Ausführung		€
612946	Stativmodell	3.495,-	2.949,-
612947	Wandmodell	3.249,-	2.749,-
612948	Deckenmodell** bis 3 m Raumhöhe***	3.549,-	2.995,-

**BIS ZU
130.000
LUX**

** Bei Deckenleuchten bitte Deckenverankerungsring (Art. Nr. 612730) separat bestellen und Raumhöhe angeben.

*** Bei Befestigungshöhen über 3 m fallen Aufpreise an.

DR. MACH LED 300DF OP-LEUCHTEN

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Die Dr. Mach LED 300 DF besticht durch höchste Lichtintensität bei einem äußerst attraktiven Preis. Die Lichtstrahlen der drei LED-Cluster lassen sich über den sterilisierbaren Handgriff bündeln und je nach Wundfeldgröße zusätzlich fokussieren.

- ▶ 160.000 Lux Lichtleistung / 1 m Arbeitsabstand
- ▶ Fokussierbares Leuchtfeld: 19–26 cm / 1 m Arbeitsabstand
- ▶ Farbwiedergabeindex: $R_a \geq 96$
- ▶ Arbeitsbereich: 70–150 cm
- ▶ Leuchtenkörper: Ø 55 cm
- ▶ Anzahl der LEDs: 36
- ▶ Lebensdauer der LEDs: 60.000 Stunden
- ▶ Elektronische Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper
- ▶ Inklusive Netzteil

Stativmodell

- ▶ Mobiles 4-Fuß Stativ

612926

~~€ 7.495,-~~

€ 6.195,-

Wandmodell

- ▶ Max. Ausladung: 175 cm

612924

~~€ 5.095,-~~

€ 4.295,-

Deckenmodell**

- ▶ Bis 3 m Raumhöhe***

612925

~~€ 5.795,-~~

€ 4.795,-



612925

DR. MACH LED 6SC OP-LEUCHTEN

Das ergonomische Design der Dr. Mach LED 6SC steht für maximales Handling, minimale Wärmeentwicklung und optimale Funktionalität. Ein Highlight der neuen Leuchte ist das sogenannte Kaskadensystem. Dabei sorgen verschiedene Linsentypen für eine vertikale Fokussierung der Lichttiefe. Das bedeutet, dass bei zunehmender Tiefe des Operationsfeldes die Leuchte nicht mehr manuell nachjustiert werden muss.

- ▶ 140.000 Lux Lichtleistung / 1 m Arbeitsabstand
- ▶ Fokussierbares Leuchtfeld: 18–30 cm / 1 m Arbeitsabstand
- ▶ Farbwiedergabeindex: $R_a \geq 98$
- ▶ Farbtemperatur nicht verstellbar
- ▶ Anzahl der LEDs: 69
- ▶ Lebensdauer der LEDs: 60.000 Stunden
- ▶ Inklusive Netzteil

Stativmodell

- ▶ Mobiles 4-Fuß Stativ

613010

~~€ 9.349,-~~

€ 7.795,-

Wandmodell

- ▶ Inklusive Trafokasten

613011

~~€ 6.949,-~~

€ 5.795,-

Deckenmodell**

- ▶ Bis 3 m Raumhöhe***

613012

~~€ 7.295,-~~

€ 6.095,-



613012

** Bei Deckenleuchten bitte Deckenverankerungsring (Art. Nr. 612730) separat bestellen und Raumhöhe angeben.

*** Bei Befestigungshöhen über 3 m fallen Aufpreise an.

EICKTRON 160 ELEKTROCHIRURGIEGERÄT

Das EickTron ist ein in der Veterinärmedizin vielseitig verwendbares Elektrochirurgiegerät. Das Gerät kann sowohl monopolar als auch bipolar eingesetzt werden. Das Gerät ist mikroprozessorgesteuert und dadurch sehr einfach in der Bedienung.

Komplett mit

- ▶ Handstück mit Fingerschalter und Verbindungskabel
- ▶ Elektrodensatz (10 Stück)
- ▶ Neutral- und Rektalelektrode inkl. Kabel
- ▶ Fußschalter

Technische Daten

- ▶ Frequenz: 600 kHz
- ▶ Max. Output: 160 W (schneiden), 100 W (koagulieren), 60 W (bipolar)
- ▶ Maße (in cm): H 10,4 x B 25,4 x T 28,8

323135



323135



323105



323106



323139

Bipolare Pinzette

- ▶ Abgewinkelt
- ▶ Länge: 150 mm

323105

Bipolares Anschlusskabel

- ▶ Für Instrumente mit Euro-Flachstecker

323106

Bipolarer Anschlussadapter

323139

**GESPART
25 %**

AKTION

EickTron 160	€ 1.395,00
+ Pinzette	€ 175,50
+ Anschlusskabel	€ 95,50
+ Anschlussadapter	€ 64,50
A32313502	€ 1.730,50

€ 1.295,-

Leasing* € 1,13 pro Tag, 48 Monate

EICKTRON EVAC RAUCHABSAUGUNG

Mit dem EickTron EVAC werden Dämpfe und Aerosole, die bei elektrochirurgischen Verfahren entstehen, wirkungsvoll abgesaugt und gefiltert. Er beseitigt unangenehme Gerüche, reduziert bakterielle und virale Belastungen und gewährleistet eine klare Sicht, besonders bei laparoskopischen Eingriffen. Die Absaugung lässt sich automatisch oder manuell mit einem Fußschalter steuern. Die Saugleistung ist individuell regulierbar.

- ▶ Maximale Saugleistung: 1000 L/min
- ▶ Maximale Saugleistung mit Filter: 300 L/min
- ▶ Maximale Saugkraft: 250 mbar
- ▶ Filtereffizienz: 99,999 %
- ▶ Maße (in cm): B 37 x H 14,4 x T 31,9
- ▶ Gewicht: 4 kg
- ▶ Inkl. Startfilter (Laufzeit: 5 Stunden), Saugschlauch-Satz, Handstückhalter, Netzkabel

323160

~~€ 1.195,-~~

€ 995,-

EickTron EVAC Filter 20

Der EVAC Filter 20 mit ULPA- und Aktivkohle-Technologie bietet eine zuverlässige Filtration feinsten Partikel sowie eine effektive Reduktion unangenehmer Gerüche, bakterieller und viraler Belastungen. Er ist für den regelmäßigen Einsatz im OP optimiert, der Filterstatus wird elektronisch überwacht.

- ▶ Laufzeit: 20 Stunden
- ▶ Partikelfiltration: bis zu 0,12 Mikrometer
- ▶ Filtertechnologie: ULPA mit Aktivkohle

32316001

€ 169,-

NEU



32316001



323160

EICKVIEW KOMPAKT ENDOSKOP

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Das speziell entwickelte EickView Kompakt Endoskop bietet durch seinen geringen Außendurchmesser von nur 3,8 mm und den integrierten Arbeitskanal die optimale Lösung für die Rhino-, Tracheo- und Vaginoskopie bei Kleintieren. Die verschraubbare Otoskopierschutzvorrichtung macht das Endoskop zudem zum idealen Instrument für die Untersuchung des äußeren Gehörgangs und des Trommelfells.

- ▶ Außendurchmesser: nur 3,8 mm
- ▶ Integrierter Arbeitskanal: Ø 1,3 mm
- ▶ Arbeitslänge: 14 cm
- ▶ Blickrichtung: 30°
- ▶ Zwei integrierte Spülhähne
- ▶ Endoskop einlegbar
- ▶ Inkl. Otoskopierschutzvorrichtung, LED-Handlichtquelle mit zwei Akkus und Ladegerät, Fremdkörperzange (Ø 1,0 mm, L 25 cm), zwei Reinigungsbürsten und Transportkoffer

306122

€ 2.795,-

€ 2.195,-

Leasing* € 1,91 pro Tag für 48 Monate



EICKVIEW TRAGBARE LED-VIDEOENDOSKOPE

Die EickView LED-Videoendoskope sind durch ihre äußerst kompakten Dimensionen die perfekte Lösung zur Broncho-, Gastro-, Uretero- und Vaginoskopie bei Hund und Katze sowie zur Untersuchung der oberen Atemwege beim Pferd. Die Geräte arbeiten völlig autark, da die leistungsstarke LED-Lichtquelle und die hochauflösende Kamera direkt im distalen Ende der Endoskope integriert sind. Darüber hinaus ermöglicht der klappbare 3,5" Monitor sowohl die direkte Video- und Bildwiedergabe als auch Speicherung per SD-Karte. Außerdem sind die EickView LED-Videoendoskope an einen separaten Monitor anschließbar.

- ▶ Klappbarer 3,5" Monitor zur Video- und Bildwiedergabe
- ▶ Aufnahme und Archivierung auf SD-Karte
- ▶ Dateiformate: JPG, AVI
- ▶ Integrierte LED-Lichtquelle
- ▶ Akku mit bis zu 3 Stunden Betriebszeit
- ▶ USB-Anschluss und Video-out
- ▶ Tiefenschärfe: 5 – 80 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Blickwinkel: 110°

EickView Videoendoskope							
Art. Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Ø außen	Arbeitskanal	Abwinklungen		€
306009	EickView 60S	60 cm	3,3 mm	1,2 mm	nach oben 180° nach unten 130°	7.495,-	6.495,-
306011	EickView 60	60 cm	4,2 mm	1,3 mm	nach oben 180° nach unten 130°	6.495,-	5.495,-
306010	EickView 70	70 cm	6,0 mm	2,0 mm	nach oben 180° nach unten 130°	6.495,-	5.495,-
306166	EickView 100E	100 cm	8,0 mm	2,8 mm	nach oben 150° nach unten 130°	6.495,-	5.495,-
306164	EickView 150E	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	nach oben 130° nach unten 130°	6.995,-	5.995,-



306009

EICKVIEW 5-IN-1 ENDOSKOPIESYSTEM

EickView 5-in-1 Endoskopiesystem

Das EickView 5-in-1 Endoskopiesystem ist ein wahres Multitalent für die Tiermedizin. Das einfach zu bedienende, mobile Gerät bietet die Möglichkeit, sowohl mit flexiblen als auch mit starren Endoskopen zu arbeiten. Somit können sämtliche Arten der Endoskopie mit nur einem Grundgerät abgedeckt werden – von der Diagnose bis hin zu chirurgischen Eingriffen.

Das EickView 5-in-1 vereint ein großes, 15,6" Full-HD-Display, eine leistungsstarke LED-Kaltlichtquelle, den Anschluss für flexible Endoskope der EickView HD-Serie mit einer Luft- und Wasserpumpe sowie die digitale Bilddatenspeicherung per SD-Karte in einem System.

306200

~~€ 6.995,-~~ **€ 5.995,-**

Leasing* € 5,03 pro Tag für 48 Monate

Outdoor Case für EickView 5-in-1

- ▶ Mit Schaumstoffeinlage
- ▶ Aus robustem Plastik

30620001

€ 595,-

EickView HD und HD+ Videoendoskope

Die EickView HD und HD+ Videoendoskope liefern brillante Bilder bei der Broncho- und Gastroskopie. Die neuen HD+ Endoskope zeichnen sich durch ihre verringerten Außendurchmesser bzw. die vergrößerten Arbeitskanäle aus. Durch die Vielzahl an verfügbaren Endoskopgrößen können Untersuchungen vom Kleintier bis zum Pferd durchgeführt werden.

Technische Daten Endoskope

- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Distalende beinhaltet 1 CMOS-Kamera-Chip, 2 Lichtleiter, Arbeitskanal, Linsenspüldüse
- ▶ Lieferumfang: Drucktester, 2 Reinigungsbürsten, Reinigungsset, Transportkoffer

EickView 5-in-1 Kamera Kit

Das Kamera Kit sorgt dafür, dass das EickView 5-in-1 Endoskopiesystem auch für starre Endoskope genutzt werden kann.

- ▶ Full-HD-Endoskopkamera
- ▶ C-Mount Zoom-Adapter
- ▶ 3 m Lichtleiterkabel

306201

~~€ 2.295,-~~ **€ 1.995,-**

Leasing* € 1,65 pro Tag für 48 Monate



306201



EickView HD Videoendoskope

Art. Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Ø außen	Arbeitskanal	Tiefenschärfe	Sichtfeld	Abwinklungen	€	
306177	EickView 60 HD Endoskop	60 cm	3,5 mm	1,2 mm	3–50 mm	120°	oben 160° / unten 130° rechts / links 0°	10.795,-	8.995,-
306178	EickView 100 HD Endoskop	100 cm	6,0 mm	2,0 mm	3–50 mm	120°	oben 210° / unten 90° rechts / links 100°	10.795,-	8.995,-
306266	EickView 150-6 HD+ Endoskop	150 cm	6,0 mm	2,8 mm	2–100 mm	120°	oben 210° / unten 90° rechts / links 100°	9.995,-	8.495,-
306268	EickView 150-8 HD+ Endoskop	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	3–50 mm	120°	oben 210° / unten 90° rechts / links 100°	7.995,-	6.695,-
306270	EickView 350 HD+ Endoskop	350 cm	13,0 mm	3,7 mm	3–100 mm	140°	oben 180° / unten 180° rechts / links 160°	8.995,-	7.495,-

Entdecken Sie die Zukunft der Veterinärmedizin mit dem EickView SD Endoskopiesystem!

Unser hochmodernes Endoskopiesystem bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre diagnostischen Fähigkeiten auf das nächste Level zu heben. Der hochwertige Endoskopiemonitor mit großem, intuitivem Touchscreen lässt sich nahtlos mit drei vielseitigen „Semi-Disposable“-Endoskopen verbinden. Nutzen Sie die Vorteile der flexiblen Endoskopie in Bereichen wie Gastroskopie, Bronchoskopie, Ureterskopie und Rhinoskopie, ohne die hohen Investitionen für herkömmliche Videoendoskope tätigen zu müssen. Jedes Endoskop ist mit einem hochauflösenden CMOS-Bildsensor und einer LED-Lichtquelle ausgestattet, die Ihnen kristallklare Bilder liefern. Dabei setzt das neue EickView 65SD-URS Ureterskop in der Urologie neue Maßstäbe: Dank des geringen Außendurchmessers von nur 2,1 mm lässt sich der Ureter selbst bei männlichen Hunden darstellen – ein entscheidender Vorteil für minimalinvasive Diagnostik und Therapie. Mit dem EickView SD Endoskopiesystem können Sie präzise Diagnosen stellen und die bestmögliche Versorgung für Ihre tierischen Patienten gewährleisten.

EickView SD Endoskopiemonitor

- ▶ 15,6" Touchscreen mit 1.920 x 1.080 Full-HD-Auflösung
- ▶ Funktionen: White Balance, Zoom, Freeze, Foto- (JPG), Videoaufnahme (MP4) und Export im DICOM-Format
- ▶ 64 GB Speicherkapazität
- ▶ Netz- und Akkubetrieb, Akkulaufzeit bis zu 5 Std.
- ▶ Ausgänge: HDMI, DVI, SDI und USB
- ▶ Maße (in cm): B 39 x H 25 x T 4
- ▶ Gewicht: 2,7 kg

307000

~~€ 2.595,-~~

€ 2.195,-

Leasing* € 1,91 pro Tag
für 48 Monate

EickView 150SD

- ▶ Arbeitslänge: 150 cm
- ▶ Ø außen: 6,0 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 2,9 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 180°
- ▶ Abwinklung rechts / links: 120°

307010

~~€ 349,-~~

€ 295,-

EickView 60SD

- ▶ Arbeitslänge: 60 cm
- ▶ Ø außen: 3,2 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 1,2 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 210°

307020

~~€ 229,-~~

€ 195,-

EickView 60SD-XS

- ▶ Arbeitslänge: 60 cm
- ▶ Ø außen: 2,7 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 1,2 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 210°

307030

~~€ 549,-~~

€ 469,-

EickView 65SD-URS

- ▶ Arbeitslänge: 65 cm
- ▶ Ø außen: 2,1 mm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 1,2 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Betrachtungswinkel: 120°
- ▶ Abwinklung oben / unten: 210°

307040

~~€ 699,-~~

€ 599,-

NEU



GESPART
18 %

AKTION

EickView SD	€ 2.595,-
+ EickView 150SD	€ 349,-
+ EickView 60SD	€ 229,-
A307000	€ 3.173,-

€ 2.595,-

Leasing* € 2,22 pro Tag, 48 Monate


MAGIC 3000 PLUS TRAGBARES ULTRASCHALLGERÄT

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Das MAGIC 3000 PLUS besticht durch sein modernes Design und die verbesserte Bilddarstellung liefert für diese Gerätekategorie herausragende Bildergebnisse. Ein integrierter Power Doppler (PDI) ermöglicht die Beurteilung des Blutflusses.

- ▶ Hochauflösender 12,1" Monitor, 30° neigbar
- ▶ Cine Mode mit Speicherfunktion
- ▶ Einstellhilfen für optimales Arbeiten
- ▶ Vet-Software (Bodymarks, Trächtigkeitsmessung)
- ▶ 2 Sondenanschlüsse für schnellen Sondenwechsel
- ▶ Interner SSD-Speicherplatz und 2 USB-Anschlüsse
- ▶ Optionaler Akku (Art. Nr. 304041) mit bis zu 2 Std. Laufzeit

304045

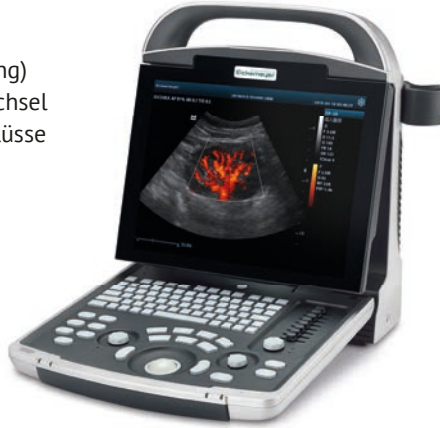

**GESPART
30%**

AKTION

MAGIC 3000 PLUS	€ 2.150,-
+ 1 Schallkopf	€ 2.150,-
+ 12x Ultraschallgel	€ 30,-

A30404507 € 4.330,-

€ 2.995,-

Leasing* € 2,56 pro Tag, 48 Monate

SCHALLKÖPFE FÜR MAGIC 3000 PLUS / 6000 PLUS

Mikro-konvex

- ▶ 5,0–8,5 MHz

303710

Linear T-förmig

- ▶ 5,0–10,0 MHz

303711

Linear rektal

- ▶ 4,0–7,5 MHz

304021



303710



303711



304021

MAGIC 6000 PLUS TRAGBARES ULTRASCHALLGERÄT

Sichere Diagnosestellung mit verbesserter Bildgebungstechnik

Das MAGIC 6000 PLUS eignet sich sehr gut für die gynäkologische und orthopädische Diagnostik des Pferdes. Auch in der abdominalen Untersuchung von Kleintieren kann das Gerät überzeugen.

- ▶ Hochauflösender 15" Monitor, 60° neigbar
- ▶ Cine Mode mit Speicherfunktion
- ▶ PW- und Power-Doppler (PDI) mit „Auto Trace“
- ▶ Optionaler Farbdoppler (Art. Nr. 30374001)
- ▶ Umfangreiche Einstellhilfen für optimales Arbeiten
- ▶ Vet-Software (Bodymarks, Trächtigkeitsmessung)
- ▶ 2 Sondenanschlüsse für schnellen Sondenwechsel
- ▶ Großer, interner SSD-Speicher und 4 USB-Anschlüsse
- ▶ Optionaler Akku (Art. Nr. 303721) mit bis zu 2 Std. Laufzeit

303740



**GESPART
30%**

AKTION

MAGIC 6000 PLUS	€ 3.495,-
+ 2 Schallköpfe	€ 4.300,-
+ 12x Ultraschallgel	€ 30,-

A30374002 € 7.825,-

€ 5.495,-

Leasing* € 4,61 pro Tag, 48 Monate

Zuverlässige Diagnosen, gestochen scharfe Bilder – intuitiv & robust

Speziell für die Tiermedizin entwickelt, überzeugt das Vetus E5 durch brillante Bildqualität, intuitive Bedienung und ein robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse. Dank Funktionen wie iTouch (automatische Bildoptimierung) und dem berührungssensitiven Gain-Regler gelingt die Handhabung schnell und effizient – auch unter Zeitdruck. Innovative Technologien wie HR Flow zur Gefäßdarstellung und Natural Touch Elastography zur Beurteilung von Gewebeeigenschaften unterstützen eine sichere, differenzierte Diagnostik.

Besondere Features

- ▶ Hervorragende Bildqualität
- ▶ HR Flow: Präzise Gefäßdarstellung in Color- und Power-Doppler
- ▶ IScanhelper – Lernbibliothek mit Bildern und Projektionen
- ▶ Standby und Start in weniger als 5 Sekunden
- ▶ Presets nach Tierart und Gewicht

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iStation™: einfache Patientendaten- und Befundverwaltung
- ▶ iClear™: reduziert Rauschen, erhöht Kontraste
- ▶ iZoom™: Vollbildmodus
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Gain-Einstellung
- ▶ 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- ▶ Farb-, Power- und Pulsed Wave Doppler

Technische Daten

- ▶ Hochauflösender 15,6" LED-Monitor
- ▶ Großer interner Speicher: 1 TB (entspricht ca. 1 Mio. Bildern)
- ▶ 2 Sondenanschlüsse
- ▶ Magnetischer Stromanschluss
- ▶ Abmessungen (in cm): B 37 x H 45 x T 33
- ▶ Gewicht: ca. 4 kg (mit Akku)
- ▶ Inkl. praktischer Transporttasche

Im Paket enthaltene Sonden

- ▶ Mikro-konvex: 2,6 – 12,8 MHz (mC11-3m / Art. Nr. 30446001)
- ▶ Linear T-förmig: 3,0 – 14,0 MHz (L14-3m / Art. Nr. 30446002)
- ▶ Weitere Schallköpfe erhältlich

A30446002

~~€ 11.995,-~~

€ 9.995,-

Leasing* € 8,74 pro Tag für 48 Monate



304460



L14-3m

mC11-3m

NEU

VETUS 50 ULTRASCHALLGERÄT

High-End-Technologie kombiniert mit übersichtlicher Anwendung

Mit dem Vetus 50 steht Ihnen ein leistungsstarkes Gerät mit neuesten Technologien für die abdominale Diagnostik der Klein- und Heimtiere zur Verfügung.

Besondere Features

- ▶ ZST+ und ComboWave Technologie: Verarbeitung akustischer Signale
- ▶ 3T-Technologie: mehr Frequenzbandbreite
- ▶ iScanHelper: Erklärung der Anschalltechnik und Darstellung des Ultraschallbildes mit Beschriftung
- ▶ Schnellauswahl der Sonden und Arbeitsmodi
- ▶ Reduzierte Tastenanzahl für bessere Übersicht
- ▶ Presets nach Tierart und Gewicht
- ▶ Zwei hochwertige Ultraschallsonden
- ▶ Einfache Patientenverwaltung und Archivierung
- ▶ Sehr leises Arbeiten bei ca. 26 dB (25 °C)
- ▶ Geschützte, ausziehbare und abwaschbare Tastatur

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iStation™: einfache Patientendaten- und Befundverwaltung
- ▶ iClear™: optimierte Bildauflösung
- ▶ iZoom™: Vollbildmodus
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Bildverbesserung
- ▶ 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- ▶ THI und PSH: Reduktion von Artefakten und verbesserte Kontrastaufklärung
- ▶ Farb-, PW- und Power-Doppler

Technische Daten

- ▶ 21,5" Full-HD LED-Monitor, mit Gelenkarm
- ▶ Zusätzlicher 13,3" Steuerungs-Touchscreen
- ▶ Bildexport in Windowsformate (DICOM Send, DICOM Worklist)
- ▶ Großer interner Speicher: 1 TB (entspricht ca. 1 Mio. Bildern)
- ▶ 4 Sondenanschlüsse
- ▶ Maße (in cm): B 54,3 x H 113 x T 81
- ▶ Gewicht: ca. 65 kg

Im Paket enthaltene Sonden

- ▶ Mikro-konvex: 2,6 – 12,8 MHz (C11-3 / Art. Nr. 30452602)
- ▶ Linear T-förmig: 3,0 – 13,0 MHz (L13-3 / Art. Nr. 30452601)
- ▶ Weitere Schallköpfe erhältlich

A305065

~~€ 15.995,-~~

€ 12.995,-

Leasing* € 10,70 pro Tag für 48 Monate



305065



C11-3



L13-3

Leistungsstark in allen Bereichen der Ultraschalldiagnostik

Mit dem Vetus 7 steht Ihnen auch für weiterführende Untersuchungen von Abdomen und Herz bei Klein- und Heimtieren ein hervorragendes Gerät mit überragender Bildqualität zur Verfügung.

Besondere Features

- ▶ Überragende Bildqualität durch iClear™ und iTouch™
- ▶ Schnellauswahl der Sonden und Arbeitsmodi
- ▶ Presets nach Tierart und Gewicht
- ▶ TDI Tissue Doppler: Gewebedoppler
- ▶ Echo Boost™: für die kardiologische Untersuchung
- ▶ CW-Doppler, EKG-Modul
- ▶ Free Xros M™: anatomischer M-Mode
- ▶ Einfache Patientenverwaltung und Archivierung
- ▶ Geschützte, ausziehbare und abwaschbare Tastatur

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iStation™: einfache Patientendaten- und Befundverwaltung
- ▶ iClear™: optimierte Bildauflösung
- ▶ iZoom™: Vollbildmodus
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Bildverbesserung
- ▶ 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- ▶ iNeedle™: optimierte Darstellung der Nadel
- ▶ THI und PSH: Reduktion von Artefakten und verbesserte Kontrastaufklärung
- ▶ Farb-, PW-, CW- und Power-Doppler

Technische Daten

- ▶ 21,5" Full-HD LED-Monitor, mit Gelenkarm
- ▶ Zusätzlicher 13,3" Steuerungs-Touchscreen
- ▶ Bildexport in Windowsformate (DICOM Send, DICOM Worklist)
- ▶ Großer interner Speicher: 1 TB (entspricht ca. 1 Mio. Bildern)
- ▶ Retrospektive Videospeicherung
- ▶ 4 Sondenanschlüsse
- ▶ Maße (in cm): B 53,8 x H 119,5 x T 85,5
- ▶ Gewicht: ca. 85 kg

Im Aktionspaket A enthaltene Sonden

- ▶ Mikro-konvex: 2,6 – 12,8 MHz (C11-3s / Art. Nr. 305056)
- ▶ Linear T-förmig: 4,4 – 13,5 MHz (L12-4s / Art. Nr. 305057)

A30507002

~~€ 21.995,-~~

€ 17.995,-

Leasing* € 14,82 pro Tag
für 48 Monate

Im Aktionspaket B enthaltene Sonden

- ▶ Mikro-konvex: 2,6 – 12,8 MHz (C11-3s / Art. Nr. 305056)
- ▶ Linear T-förmig: 4,4 – 13,5 MHz (L12-4s / Art. Nr. 305057)
- ▶ Phased array: 2,3 – 7,2 MHz (P8-2s / Art. Nr. 305058)
- ▶ Weitere Schallköpfe erhältlich

A30507003

~~€ 27.995,-~~

€ 21.995,-

Leasing* € 17,78 pro Tag
für 48 Monate



305070



C11-3s



L12-4s



P8-2s

VETUS 80 ULTRASCHALLGERÄT

Spitzenklasse für Ihre Ultraschalluntersuchungen

Möchten Sie bei Ultraschalluntersuchungen keine Kompromisse mehr machen? Dann ist das Vetus 80 das Ultraschallgerät Ihrer Wahl. Es ist nicht nur extrem schnell, sondern liefert auch qualitativ hochwertige Ultraschallbilder, die keine Wünsche offenlassen. Die patentierte, softwarebasierte ZONE Sonography Technology (ZST+) nutzt akustische Signale statt herkömmlicher Schallwellen und ermöglicht dadurch einen bis zu zehnfach schnelleren Bildaufbau. Die modernste 3T-Sondentechnologie erzeugt eine höhere Frequenzbandbreite und extrem hohe Detailgenauigkeit im Fernfeld.

Besondere Features

- ▶ ZST+ und ComboWave: Verarbeitung akustischer Signale
- ▶ 3T-Technologie: mehr Frequenzbandbreite
- ▶ iScanHelper: Erklärung der Anschalltechnik und Darstellung des Ultraschallbildes mit Beschriftung
- ▶ Glazing Flow: Visuelle 3D-Farbdopplerdarstellung bietet eine eindeutige und reale Darstellung von sehr kleinen Blutgefäßen
- ▶ Sehr leises Arbeiten bei >26 dB (25 °C)
- ▶ Reduzierte Tastenanzahl für bessere Übersicht
- ▶ Geschützte, ausziehbare und abwaschbare Tastatur

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iClear™ PLUS: optimierte Bildauflösung
- ▶ iCompare: Anzeige von Röntgen-, CT- und US-Bildern auf demselben Bildschirm
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Bildverbesserung
- ▶ iReport: individuelle Berichtsvorlagen mit professionellen Kommentaren
- ▶ iStorage: Einfaches Importieren und Exportieren der Daten
- ▶ THI und PSH: Reduktion von Artefakten und verbesserte Kontrastaufklärung
- ▶ TDI Tissue Doppler: Gewebedoppler
- ▶ CW-Doppler, EKG-Modul
- ▶ Farb-, PW-, und Power-Doppler

Technische Daten

- ▶ 23,8" HD-Monitor, mit multidirektionalem Gelenkarm
- ▶ Zusätzlicher 15,6" Steuerungs-Touchscreen
- ▶ DICOM Send, DICOM Worklist und WLAN
- ▶ 4 Sondenanschlüsse

Im Aktionspaket A enthaltene Sonden

- ▶ Mikro-konvex: 2,6 – 12,8 MHz (C13-3s / Art. Nr. 305082)
- ▶ Linear T-förmig: 3,0 – 13,0 MHz (L13-3Ns / Art. Nr. 305092)

A30508002

~~€ 30.445,-~~

€ 24.995,-

Leasing* € 20,20 pro Tag
für 48 Monate

Im Aktionspaket B enthaltene Sonden

- ▶ Mikro-konvex: 2,6 – 12,8 MHz (C13-3s / Art. Nr. 305082)
- ▶ Linear T-förmig: 3,0 – 13,0 MHz (L13-3Ns / Art. Nr. 305092)
- ▶ Phased array: 2,3 – 8,0 MHz (P8-2s / Art. Nr. 305058)
- ▶ Weitere Schallköpfe erhältlich

A30508003

~~€ 36.445,-~~

€ 28.995,-

Leasing* € 24,44 pro Tag
für 48 Monate



305080



C13-3s



P8-2s



L13-3Ns

Modernstes High-End-Ultraschallsystem

Mit dem Vetus 9 steht Ihnen ein Gerät der Extraklasse mit hochentwickelten und noch leistungsstärkeren Technologien zur Verfügung. Die überragende Bildqualität ermöglicht eine zügige Diagnosestellung auch in komplizierten Fällen.

Besondere Features

- ▶ Rohdatenbearbeitung
- ▶ ZONE Sonography® Technology: automatische Fokuszone
- ▶ iScanHelper: Erklärung der Anschalltechnik und Darstellung des Ultraschallbildes mit Beschriftung
- ▶ Smart 3D™: dreidimensionale Darstellung
- ▶ Glazing Flow: 3D-Farbdoppler
- ▶ Cardio Messungen: Simpson, Cornell, Teichholz
- ▶ Echo Boost™: für die kardiologische Untersuchung
- ▶ Free Xros M™: anatomischer M-Mode
- ▶ Phased array Sonde mit Einkristall-Technologie (SP5-1s)

High End
Abdomen &
Kardio

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iStation™: einfache Patientendaten- und Befundverwaltung
- ▶ iClear+: hochoptimierte Bildauflösung
- ▶ Zoom / iZoom™: Vollbildmodus
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Bildverbesserung
- ▶ Digitale 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- ▶ THI und PSH: Reduktion von Artefakten und verbesserte Kontrastaufklärung
- ▶ Farb-, PW-, CW- und Power-Doppler
- ▶ TDI Tissue Doppler: Gewebedoppler
- ▶ Vet-Software (Bodymarks, Trächtigkeitsmessung)

Technische Daten

- ▶ 23,8" Full-HD LED-Monitor, mit multidirektionalem Gelenkarm
- ▶ Zusätzlicher 16,5" Steuerungs-Touchscreen
- ▶ Bildexport in Windowsformate (DICOM Send, DICOM Worklist)
- ▶ Großer interner Speicher: 1 TB (entspricht ca. 1 Mio. Bildern)
- ▶ Retrospektive Videospeicherung in allen Anwendungen
- ▶ 5 Sondenanschlüsse
- ▶ Maße (in cm): B 54,5 x H 100 x T 102
- ▶ Gewicht: ca. 107 kg

Im Aktionspaket enthaltene Sonden

- ▶ High Definition mikro-konvex: 2,6 – 12,8 MHz (C11-3s / Art. Nr. 305056)
- ▶ High Definition linear T-förmig: 3,0 – 13,0 MHz (L13-3Ns / Art. Nr. 305092)
- ▶ Phased array: 2,3 – 8,0 MHz (P8-2s / Art. Nr. 305058)
- ▶ Phased array Single Crystal: 1,5 – 4,5 MHz (SP5-1s / Art. Nr. 305091)
- ▶ Weitere Schallköpfe erhältlich

A30509001

~~€ 61.495,-~~

€ 49.950,-

Leasing* € 40,38 pro Tag für 48 Monate



305090



C11-3s



P8-2s



L13-3Ns



SP5-1s

VETUS EQ TRAGBARES ULTRASCHALLGERÄT

Der Spezialist für Ihre Pferdepraxis

Mit dem Vetus EQ steht Ihnen ein sehr leichtes und hochauflösendes Gerät zur Verfügung, welches speziell für die Anforderungen der mobilen Pferdepraxis entwickelt wurde. Das ultraleichte und wasserdichte Gerät besticht durch sein modernes, schlankes Design und dank „U-bank“ kann es bis zu 8 Stunden autark arbeiten, bevor es aufgeladen werden muss.

Besondere Features

- ▶ Hervorragende Bildqualität
- ▶ Automatische Einstellung der Fokusposition
- ▶ Presets nach Tierart und Gewicht
- ▶ Softfunktionstasten mit geschlossener Silikonoberfläche
- ▶ Echo Boost™ für die kardiologische Untersuchung

Einstellhilfen für optimales Arbeiten

- ▶ iStation™: einfache Patientendaten- und Befundverwaltung
- ▶ iClear™: optimierte Bildauflösung
- ▶ iZoom™: Vollbildmodus
- ▶ iBeam™: verbesserte Bildauflösung in Echtzeit
- ▶ iTouch™: automatische Gain-Einstellung
- ▶ 8-fache TGC: manueller Ausgleich der Signalstärke über die gesamte Eindringtiefe
- ▶ THI und PSH: Reduktion von Artefakten und verbesserte Kontrastaufklärung
- ▶ Farb-, PW- und Power-Doppler

Technische Daten

- ▶ LED-Monitor, 40 cm Diagonale
- ▶ Zusätzlicher Touchscreen, 31 cm Diagonale
- ▶ Bildexport in Windowsformate (DICOM Send)
- ▶ Großer interner Speicher: 1 TB (entspricht ca. 1 Mio. Bildern)
- ▶ 1 Sondenanschluss
- ▶ Abmessungen (in cm): B 37 x H 44 x T 33
- ▶ Gewicht: ca. 3 kg (ca. 3,5 kg mit Akku)
- ▶ Inkl. praktischem Transportrucksack

304550

€ 8.500,-



304550



6LE5Vs



L13-3Ns



C5-1s

Schallkopf, linear rektal

- ▶ 3,0 – 11,5 MHz (6LE5Vs)

304518

€ 3.995,-

Schallkopf, konvex (Abdomen)

- ▶ 1,2 – 6,0 MHz (C5-1s)

304551

€ 3.995,-

Schallkopf, linear T-förmig

- ▶ 3,0 – 13,0 MHz (L13-3Ns)

305092

€ 3.995,-

GESPART
15 %

AKTION

Vetus EQ	€ 8.500,-
+ 2 Schallköpfe	€ 7.990,-
+ 12x Ultraschallgel	€ 30,-
A30455002	€ 16.525,-

€ 13.995,-

Leasing* € 11,52 pro Tag, 48 Monate

ULTRASCHALL, CT UND MRT LAGERUNGSKISSEN NACH DR. SCHRAMM

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Bei Ultraschalluntersuchungen ist es von großem Vorteil, wenn die Patienten entspannt sind und gut liegen – die Lagerungskissen nach Dr. Schramm bieten hierfür die optimale Voraussetzung.

- ▶ Zur einfachen Positionierung bei der abdominalen Sonografie
- ▶ Bequem gelagerte Tiere – bessere Ultraschallaufnahmen
- ▶ Robuster, pflegeleichter Kunststoff

Größe 1

- ▶ Für Katzen / kleine Hunde
- ▶ Maße (in cm):
B 25 x H 10 x L 80

303991

~~€ 113,-~~

€ 99,-

Größe 3

- ▶ Für große Hunde
- ▶ Maße (in cm):
B 50 x H 20 x L 130

303993

~~€ 199,-~~

€ 175,-



303992

Größe 2

- ▶ Für mittelgroße Hunde
- ▶ Maße (in cm):
B 35 x H 14 x L 100

303992

~~€ 133,-~~

€ 119,-

ALLE DREI
A303991
€ 369,-

ULTRASCHALL-TISCHAUFSATZ NACH DR. SCHRAMM

Bei Ultraschalluntersuchungen ist es von großem Vorteil, wenn die Patienten entspannt sind und gut liegen – der Tischaufsatz nach Dr. Schramm bietet hierfür die optimale Voraussetzung.

- ▶ Ergonomisch ausgeschnitten für perfektes Herzecho
- ▶ Bietet ausreichende Bewegungsfreiheit für den Untersucher
- ▶ Geringer Platzbedarf und leichtes Aufstellen (5 Klappfüße)
- ▶ Für Untersuchungstische ab B 45 cm x L 100 cm
- ▶ Maße (in cm): B 60 x H 19 x L 140

303976


€ 379,-

Gepolsterte Auflage

- ▶ Bessere Ultraschallbilder durch bequem gelagerte, ruhigere Patienten
- ▶ Mit Klettbindern für einen sicheren Halt

30397602

€ 179,-

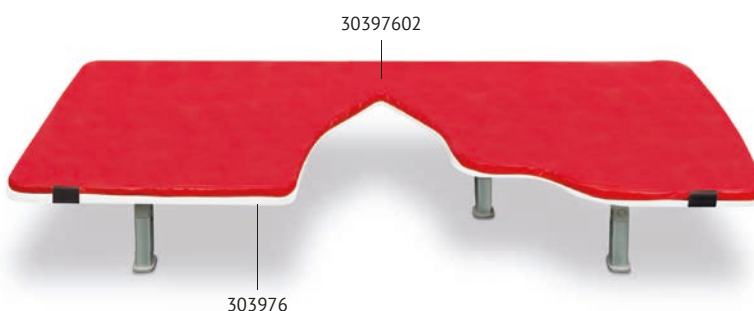

GESPART
16 %

AKTION

Tischaufsatz	€ 379,-
+ Auflage	€ 179,-
A303976	€ 558,-

€ 469,-

PROFIDENT PLUS FAHRBARE DENTALEINHEIT

Die Profident PLUS bietet ein breites Anwendungsspektrum für Allgemeinpraktiker und Fachtierärzte. Die Konsole ist höhenverstellbar und die Handstücke werden mit Luft und Wasser versorgt, sobald sie aus ihrer Halterung gehoben werden.

High Speed-Winkelstück (300.000 U/min) mit LED-Beleuchtung

- ▶ Schlüssellos zu spannen (Push-Button)
- ▶ Mit variabler Wasserkühlung

Low Speed-Motor mit Geradeaus-Handstück (20.000 U/min)

- ▶ Für Polieraufsätze, Trennscheiben und Bohrer (Handstückansatz)
- ▶ Optionale Wasserkühlung (Art. Nr. 174022)

Integriertes Zahnsteinentfernungsgerät mit LED-Beleuchtung

- ▶ Moderne Piezo-Technik
- ▶ Inkl. fünf langlebigen Spitzen

Dreiwegespritze

- ▶ Präzise Kontrolle von Wasser, Luft und Spray

Kompressor für Dentaleinheiten

- ▶ Leistungsstark, leise und wartungsarm

Mikro-Ölfilter

- ▶ Damit Ihre Handstücke länger leben

174001



Scaler mit LED-Beleuchtung



Dental-Turbinenhandstück mit LED

Starterset für Profident PLUS

Beinhaltet alle notwendigen Zubehörteile.

- ▶ Universalpflegespray mit 2 Adaptern
- ▶ Kunststoff-Polieraufsätze und Polierpaste
- ▶ 22 Bohrer für Katzen und Hunde
- ▶ Reinigungsbürstchen

174004



174001

**GESPART
24%**

AKTION

Profident PLUS	€ 5.495,-
+ Ersatzwinkelstück	€ 349,-
+ Starterset	€ 319,-

A17400101 € 6.163,-

€ 4.695,-

Leasing* € 4,01 pro Tag, 54 Monate

MOBILES DENTALSTATIV

Macht jeden Tisch zum Zahnbehandlungstisch!

Mit dem mobilen Dentalstativ von EICKEMEYER® wird jeder OP- oder Behandlungstisch zum ergonomischen Zahnbehandlungstisch.

- ▶ Zum Ansetzen an OP- und Behandlungstische
- ▶ Ergonomische, halbrunde Wanne mit Gitterrost
- ▶ Wanne zur Reinigung einfach abnehmbar
- ▶ Komplett aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Mit 4 feststellbaren Leichtlaufrollen
- ▶ Höhenverstellbar von 75 – 100 cm
- ▶ Wannengröße (in cm): B 50 x T 35

605105

~~€ 619,-~~

€ 495,-



PROFIDENT HMS HANDSTÜCK-PFLEGESYSTEM

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Das Profident HMS ist ein vollautomatisches Pflegesystem zur effizienten Reinigung und Wartung von Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen. Es trägt aktiv zur Werterhaltung Ihrer Instrumente bei, verlängert deren Lebensdauer und sorgt für eine konstant hohe Leistungsfähigkeit. Mit einem intelligenten Anschlusskonzept bietet das System Platz für bis zu drei Handstücke gleichzeitig. Dank des benutzerfreundlichen 3-Programm-Systems (Zyklen von 1, 1,5 oder 2 Minuten) lässt sich die Pflege individuell anpassen.

Technische Details

- ▶ Pflegekapazität: bis zu 3 Handstücke gleichzeitig
- ▶ Ein E-Typ-Anschluss für Low-Speed Hand- und Winkelstücke
- ▶ Zwei Anschlüsse für High-Speed Turbinenhandstücke
- ▶ Betrieb über den Kompressor Ihrer Dentaleinheit
- ▶ Kompakte Maße (in cm): B 28 x H 38 x T 27
- ▶ Gewicht: 7,5 kg
- ▶ Inklusive 1000 ml Pflegeöl

174050

~~€ 529,-~~

€ 449,-

NEU



EICKEMEYER® WASCH- UND DENTALTISCH

Der multifunktionale Wasch- und Dentaltisch ist komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und zeichnet sich durch sein ergonomisches Design und den großzügigen Stauraum aus.

- ▶ Formschöner Waschtisch mit 3 Schubladen und einer Tür
- ▶ Kniefreiraum für sitzende Tätigkeiten
- ▶ Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- ▶ Edelstahlwanne mit einer Beckentiefe von 15 cm und Abflusssieb
- ▶ Abnehmbarer, zweiteiliger Gitterrost
- ▶ Armatur mit 70 cm ausziehbarem Brausekopf
- ▶ 2 Wasserstrahlarten einstellbar
- ▶ Maße (in cm): L 140 x B 60 x H 88

639060

~~€ 2.495,-~~

€ 1.995,-



HIRAY DENTAL DENTALES RÖNTGengerÄT

Das präzise, zuverlässige und ergonomische HiRay DENTAL Hochfrequenz-Röntgengerät bietet anwenderfreundliche Funktionen, beste Leistung und exzellente Bildqualität. Kurze Expositionszeiten ermöglichen eine signifikante Dosisreduktion für den Patienten sowie scharfe, wiederholbare und qualitativ hochwertige Röntgenaufnahmen.

- ▶ Niedrigere Dosis bei hoher Auflösung
- ▶ Stabile Arme garantieren eine präzise Linearbewegung
- ▶ Bilder von höchster Qualität – egal ob Filme, Speicherfolien oder digitale Sensoren verwendet werden

Technische Daten

- ▶ Fokus: 0,4 mm
- ▶ Belichtungszeit: 0,01 – 2 Sek.
- ▶ Hohe Spannung: 60 – 65 – 70 kVp
- ▶ Anodenstrom: 5 mA

Wandmodell

- ▶ Maximale Ausladung: ca. 1,98 m

176530

Stativmodell

- ▶ Maximale Ausladung: ca. 1,30 m

176535

Jeweils

~~€ 3.795,-~~

€ 3.195,-

Leasing* € 2,49 pro Tag für 54 Monate

Installation & Einweisung

S21270000

€ 395,-



176530

DIGIVET® CR PREMIUM DENTAL READER

Der einfach zu bedienende DigiVet® CR Premium Dental Reader liefert jetzt eine noch brillantere Bildqualität. Mit einer Auflösung von 21 lp/mm lässt das digitale Speicherfoliensystem keine Wünsche mehr offen.

- ▶ Unterstützt jetzt auch Speicherfolien der Größe 4
- ▶ Vorhandene Röntgengeräte können verwendet werden
- ▶ Unterstützt Speicherfolien der Größe 0, 1, 2, 3, 4c und 4
- ▶ Mit Bildvorschau auf dem Bildschirm des Readers
- ▶ Selbstkalibrierung für Stabilität und Langzeit-Performance
- ▶ Kompaktes Design, Maße (in cm): B 12 x H 26,5 x T 31,8

Inklusive DigiVet® CR Premium Starter-Set

- ▶ 4x Größe 2 (31 x 41 mm) Speicherfolien
- ▶ 1x Größe 4c (48 x 54 mm) Speicherfolie
- ▶ 1x Größe 4 (54 x 76 mm) Speicherfolie
- ▶ Je 100 Hygiene-Hüllen der Größe 2, 4c und 4

708036

~~€ 5.995,-~~

€ 4.995,-

Leasing* € 3,89 pro Tag für 54 Monate



GESPART
23%

AKTION

DigiVet® CR PREMIUM € 5.995,-
+ HiRay DENTAL € 3.795,-

A708036 ~~€ 9.790,-~~

€ 7.495,-

Leasing* € 5,72 pro Tag, 54 Monate

Installation & Einweisung: € 395,-

Für die einfachere, sicherere und schnellere Dentalchirurgie!

DENTANOMIC Dentalinstrumente sind eine Innovation auf dem Gebiet der Dentalchirurgie und vereinfachen die Zahnextraktion wesentlich. Die Klingen sind extra gehärtet und verfügen über einen speziellen, sehr scharfen Anschliff, um die zervikalen Parodontalfasern ohne großen Kraftaufwand zu durchtrennen und den Parodontalspalt aufzuweiten. Der ergonomisch geformte Handgriff aus hochwertigem Aluminium liegt optimal in der Hand und ermöglicht so eine sichere Instrumentenführung. Mit den auswechselbaren Klingen lassen sich die Instrumente schnell und einfach an die jeweilige OP-Situation anpassen.

DENTANOMIC Set – Bronze

Set komplett, bestehend aus 2 Handgriffen (lila und orange) + Elevator- und Luxator-Klingen Set (9 Stück) + Aufbewahrungsrack

Mit Standardhandgriffen

► Bis Handschuhgröße 7,5

175050

~~€ 619,-~~

€ 549,-

Mit langen Handgriffen

► Ab Handschuhgröße 8,0

175051

Jetzt GRATIS testen!

Kämpfen auch Sie immer wieder mit zeitraubenden Zahnextraktionen, weil Ihre Instrumente nicht scharf genug sind?

Die DENTANOMIC Dentalinstrumente haben **dünnere und schärfere Klingen** als Sie es gewohnt sind und mit der richtigen Extraktionstechnik **garantieren** wir Ihnen deutlich **schnellere***, **einfachere** sowie **sicherere** Zahnextraktionen!

So läuft es ab:

- Sie bestellen ein **DENTANOMIC Set** Ihrer Wahl.
- Wir laden Sie zu einer **kostenlosen Onlineschulung** ein, in der wir Sie mit der Extraktionstechnik vertraut machen. Scannen Sie hierzu den QR-Code:



- Sie haben dann **einen Monat Zeit**, die DENTANOMIC Instrumente zu testen. Beschädigen Sie während dieser Zeit eine Klinge, **ersetzen** wir diese **kostenlos****.
- Nach Ablauf des Testzeitraums **entscheiden Sie**, ob Sie das Set behalten wollen oder nicht. Wenn Sie nicht zufrieden sind, lassen wir es bei Ihnen abholen und erstatten Ihnen den Preis zurück.

*Begeisterte Kunden berichten von einer Zeitersparnis von bis zu 50 %!

**Begrenzt auf eine Klinge jedes Typs.

DENTANOMIC Set – Silber

Set komplett, bestehend aus 3 Handgriffen (grün, blau und rosa) + Elevator- und Luxator-Klingen Set (9 Stück) + Aufbewahrungsrack + Schleifset

Mit Standardhandgriffen

► Bis Handschuhgröße 7,5

175060

~~€ 799,-~~

€ 699,-

Mit langen Handgriffen

► Ab Handschuhgröße 8,0

175061

DENTANOMIC Set – Gold

Set komplett, bestehend aus 5 Handgriffen (lila, orange, grün, blau und rosa) + Elevator- und Luxator-Klingen Set (9 Stück) + Aufbewahrungsrack + Schleifset + Sterilisationsbehälter

Mit Standardhandgriffen

► Bis Handschuhgröße 7,5

175070

Mit langen Handgriffen

► Ab Handschuhgröße 8,0

175071

Mit gemischten Handgriffen

- 3 Standardhandgriffe bis Handschuhgröße 7,5
- 2 lange Handgriffe ab Handschuhgröße 8,0

175072

~~€ 1.149,-~~

€ 999,-




175072

DENTANOMIC PERIOSTELEVATOR SET

DENTANOMIC Dentalinstrumente sind eine Innovation auf dem Gebiet der Dentalchirurgie und vereinfachen die Zahnextraktion wesentlich. Mit den auswechselbaren Klingen lassen sich die Instrumente schnell und einfach an die jeweilige OP-Situation anpassen. Außerdem muss nach Verschleiß der Klinge nicht mehr das gesamte Instrument entsorgt werden. Die Klingen sind extra gehärtet und verfügen über einen speziellen, sehr scharfen Anschliff.

Die einzigartigen periostalen Elevatoren verfügen über eine scharfe Vorderkante, eine abgerundete Form und abgewinkelte Seiten, damit der Zahnfleischlappen schnell und einfach angehoben werden kann. Die präzisen Kanten und die abgerundeten Partien lösen das Periost einfach vom Knochen und schützen gleichzeitig das empfindliche Zahnfleischgewebe. Das neue Set enthält 4 periostale Elevator-Klingen von 2 mm bis 8 mm, die natürlich auf die DENTANOMIC Handgriffe passen, und wird mit einem eigenen Aufbewahrungs- und Sterilisationsrack geliefert.

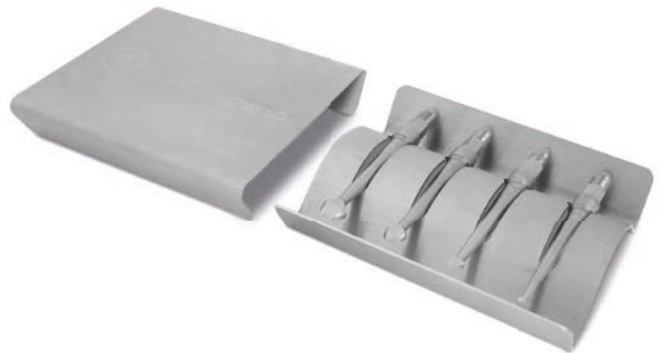

- Set bestehend aus 4 Periostelevator-Klingen (2, 4, 6 und 8 mm) und Sterilisationsbehälter

175115

~~€ 399,-~~ € 349,-

DENTANOMIC EQUINE SET FÜR DIE PFERDEZAHNMEDIZIN

Nach dem großen Erfolg in der Kleintiermedizin präsentiert DENTANOMIC® stolz das neue Equine Set für die Pferde Zahnbehandlung. In Zusammenarbeit mit Dr. Travis Henry (USA) entwickelt, bringt dieses hochmoderne Instrumentenset die innovative DENTANOMIC®-Technologie nun auch in die Pferdepraxis.

Das Equine Set enthält 14 Luxationsklingen für Pferde (3 und 5 mm in kurzer, mittlerer und langer Ausführung – jeweils gerade, links- und rechtsgewinkelt). Die scharfen Klingen sind dünner als der Parodontalspalt, was die Luxation deutlich erleichtert.

DENTANOMIC Equine-Klingen von können verwendet werden mit:

- Innovative Molar Extension Bar: Der Gelenkmechanismus ermöglicht seitliche Schneidbewegungen bei gleichzeitiger Rotation entlang der Zahnkontur – ideal zur Backenzahnextraktion
- Neue Equine-Handgriffe: Mit verbessertem Griff und optimiert für vertikales Halten – ideal zur Schneidezahnextraktion

Lieferumfang

- 4 Equine-Handgriffe (lila, orange, grün und blau), 1 Griffbehälter, 1 Molar Extension Bar, 14 Luxationsklingen für Pferde, 1 Klingenbehälter

Mit Standardhandgriffen

- Bis Handschuhgröße 7,5

175160

Mit langen Handgriffen

- Ab Handschuhgröße 8,0

175161

~~€ 1.995,-~~ € 1.695,-



NEU



RÖNTGENSYSTEM FÜR PFERDE

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

DigiVet® DR Equine WLAN-Panel Set

Für die digitale Röntgenbildgebung in der mobilen Pferdepraxis. Das DigiVet® DR Equine besticht durch seine einfache Bedienung, die schnelle, drahtlose Übertragungsgeschwindigkeit sowie gestochen scharfe, hochauflösende Röntgenbilder.

- ▶ Aktive Fläche von 25 x 30 cm
- ▶ Höchste Auflösung durch CsI PLUS Szintillator
- ▶ Automatische Belichtungserkennung (Anytime™)
- ▶ DQE Technologie für reduzierte Dosis
- ▶ Röntgenspannungsbereich: 40 – 150 kV
- ▶ Li-Ion Batterie: 8 Std. Standby / ca. 750 Aufnahmen
- ▶ Maße (in cm): L 28,7 x B 35 x H 1,5
- ▶ Gewicht: 2,1 kg

Set komplett, bestehend aus:

- ▶ DigiVet® DR Equine WLAN-Panel
- ▶ VXvue™ Bildbearbeitungssoftware
- ▶ High-End-Notebook mit 15,6" Full-HD Monitor
- ▶ PODOBLOCK® Schutzbox
- ▶ Outdoor-Case für alle Komponenten

708500

~~€ 19.995,-~~

€ 16.995,-

Leasing* € 12,70 pro Tag für 54 Monate

Online-Einweisung

S708482

€ 295,-

HiRay LITE Röntgengerät

Das HiRay LITE ist ein kompaktes, batteriebetriebenes Röntgengerät für die mobile Pferdepraxis. Mit einem Gewicht von nur 7,2 kg und einer Leistung von bis zu 90 kV bei 20 mA ist es den meisten Mitbewerbern in dieser Gewichtsklasse weit voraus.

- ▶ Hohe HF-Leistung 50 – 90 kV / max. 20 mA, 1,6 kW
- ▶ Hochauflösende Bildgebung bei niedriger Dosis
- ▶ Fokus: 1,2 x 1,2 mm
- ▶ Lichtvisier mit hellem LED-Licht
- ▶ Integrierter Dual-Laserstrahl zur einfachen Abstandsmessung
- ▶ 2-stufiger Hand-Auslöseschalter
- ▶ Lithium-Polymer-Akku für bis zu 560 Aufnahmen
- ▶ Weniger als 3 Stunden Ladezeit
- ▶ Kompakte Maße (in cm): L 31 x B 20 x H 17
- ▶ Geringes Gewicht: nur 7,2 kg
- ▶ Inkl. Alukoffer und Ladegerät

701111

~~€ 7.995,-~~

€ 6.995,-

Leasing* € 5,86 pro Tag für 48 Monate



708500



701111

GESPART
19%

AKTION

DigiVet® DR Equine Set	€ 19.995,-
+ HiRay LITE	€ 7.995,-
+ Online Einweisung	€ 295,-
A708500	€ 28.285,-

€ 22.995,-

Leasing* € 16,84 pro Tag, 54 Monate

HIRAY PLUS RÖNTGENERÄT

Das Leichtgewicht mit der starken Leistung

Das HiRay PLUS ist ein tragbares Hochfrequenz-Röntgengerät, welches sich sowohl für den Außeneinsatz als auch für die Kleintierpraxis eignet. Besonderes Kennzeichen ist ein leistungsstarker HF-Inverter, das geringe Gewicht und die kompakten Maße sowie ein integriertes Lichtvisier mit Fadenkreuz und zwei Zentrierlaserdioden zur genauen Distanzmessung.

Technische Daten

- ▶ Hohe HF-Leistung 40 – 100 kV / max. 30 mA, 2 kW
- ▶ Einstellbereiche: 32 verschiedene mAs-Bereiche
- ▶ Organautomatik: 8 Speicherplätze
- ▶ Fokus: 1,2 x 1,2 mm
- ▶ Lichtvisier mit heller Halogenbirne und automatischer Zeitschaltuhr
- ▶ Integrierter Laserstrahl zur einfachen Abstandsmessung
- ▶ Mit 2-stufigem Hand-Auslöseschalter
- ▶ Drehbares Display für die Klein- oder Großtierpraxis
- ▶ Im praktischen und stabilen Alukoffer
- ▶ Kompakte Maße (in cm): L 28 x B 16,3 x H 16
- ▶ Geringes Gewicht: nur 8,9 kg

701115

~~€ 7.195,-~~

€ 5.995,-

Leasing* € 5,03 pro Tag für 48 Monate



HIRAY 5 RÖNTGENERÄT

Das tragbare Röntgengerät mit sehr starker Leistung

Das HiRay 5 ist das modernste, tragbare Hochleistungs-röntgengerät, das sowohl für den Außeneinsatz als auch für die klinische Anwendung zur Verfügung steht. Der integrierte Kollimator mit Fadenkreuz und zwei Laserpointern ermöglicht ein leichtes und schnelles Erfassen jeder radiografischen Position. Dadurch wird eine korrekte Fokusposition exakt und sehr leicht ermittelt.

Technische Daten

- ▶ Sehr hohe HF-Leistung: 40 – 120 kV / max. 16 mAs, 5 kW
- ▶ Einstellbereiche: 26 verschiedene mAs-Bereiche
- ▶ Organautomatik: 168 Speicherplätze
- ▶ Fokus: 1,8 x 1,8 mm
- ▶ Lichtvisier mit heller Halogenbirne und automatischer Zeitschaltuhr
- ▶ Integrierter Laserstrahl zur einfachen Abstandsmessung
- ▶ Mit 2-stufigem Hand-Auslöseschalter
- ▶ Im praktischen und stabilen Alukoffer
- ▶ Maße (in cm): L 35 x B 20,3 x H 16
- ▶ Gewicht: nur 14 kg

701105

~~€ 9.195,-~~

€ 7.495,-

Leasing* € 6,28 pro Tag für 48 Monate



DIGIVET® DR RÖNTGENPANEL

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Das DigiVet® DR Panel ist die neueste digitale Upgrade-Lösung, die keine Änderung an Ihrem konventionellen Röntgensystem erfordert. Die Panelgröße von 43 x 43 cm ermöglicht eine schnelle und mühelose Integration. Das DigiVet® DR Panel liefert eine erstaunliche Auflösung von 9,4 Megapixel sowie ultraschnelle Erfassungszeiten von nur 1,2 Sekunden. Die mitgelieferte VXvue™ Imaging-Software ist benutzerfreundlich, vielseitig und mit dem DICOM 3.0 Standard konform. Die automatische Belichtungserkennung (AED) ermöglicht außergewöhnliche und reproduzierbare Ergebnisse zu einem erschwinglichen Preis.

- ▶ CsI Szintillator
- ▶ Panel-Technologie: a-Si TFT mit PIN-Diode
- ▶ Pixelabstand: 140 µm x 140 µm
- ▶ 9,4 Megapixel: 3.072 x 3.072 Pixel
- ▶ Bildgröße: 17" x 17" (43 x 43 cm)
- ▶ A/D-Umwandlung: 14 Bit
- ▶ Graustufen: 16.384 Graustufen
- ▶ Auto-Trigger-AED-Modus
- ▶ Schnittstelle: Gigabit Ethernet
- ▶ Maße (in mm): L 470 x B 470 x H 15
- ▶ Gewicht: ca. 4,6 kg

Komplettpaket beinhaltet

- ▶ DigiVet® DR Flachbilddetektor
- ▶ VXvue™ Bildbearbeitungssoftware
- ▶ High-End-PC mit SSD und 2 TB HDD-RAID
- ▶ 24" Diagnosemonitor
- ▶ Kabellose Tastatur und Maus

A708482

~~€ 15.995,-~~

€ 12.995,-

Leasing* € 9,71 pro Tag für 54 Monate

Online-Einweisung

S708482

€ 295,-



TISCHSTATIV FÜR MOBILE RÖNTGENGERÄTE

Das Tischstativ mit "schwimmender" Tischplatte ist ideal für mobile Röntgengeräte. Es verfügt über einen großzügigen, 4-Wege Verschieberegion, was die Positionierung Ihrer Patienten erheblich vereinfacht.

- ▶ 60 cm Längs- und 20 cm Lateralverschiebung, mechanisch gebremst
- ▶ Tischplatte: L 150 x B 72 cm, 78 cm hoch, mit 4 Befestigungsklemmen
- ▶ Selbstjustierende Kassetten-Raster-Lade mit Mittenzentrierung (45 x 45 cm)
- ▶ Maße: (in cm): L 150 x B 95 x H 200

701480

~~€ 3.495,-~~

€ 2.995,-

Leasing* € 2,56 pro Tag
für 48 Monate

GESPART
28 %

AKTION

HiRay PLUS	€ 7.195,-
+ Tischstativ	€ 3.495,-
+ DigiVet® DR	€ 15.995,-
+ Installation & Einweisung	€ 995,-

A70111504 ~~€ 27.680,-~~

€ 19.995,-

Leasing* € 14,94 pro Tag, 54 Monate



VETIX S300 DR RÖNTGENSYSTEM

Das Vetix S300 ist ein hochmodernes Röntgensystem von Mindray. Mit mehr als 30 Patenten vereint es eine hochwertige Röntgenröhre mit einem Detektor der neuesten Generation. Zusammen mit dem gut konzipierten Arbeitsablauf und professionellen Bildgebungslösungen ist es eine ausgezeichnete Wahl für Tierärzte, die Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation in der Veterinärradiologie suchen.

Hochwertige Röntgenröhre

Die hochwertige Canon-Röntgenröhre bietet eine Lebensdauer von über 100.000 Aufnahmen.

- ▶ Maximale Generatorleistung: 32 kW
- ▶ kV-Bereich: 40 bis 125 kV
- ▶ mA-Bereich: 10 bis 500 mA

Ultrahochfrequenz-Wechselrichter

Die einzigartige Wechselrichterfrequenz von 460 kHz verbessert die Strahlungsqualität, reduziert Strahlungsrauschen, verbessert die Bildqualität und ermöglicht Belichtungszeiten von 1 ms bis 8 s.

Hochleistungs-Röntgenpanel

Das integrierte CsI-Panel bietet einen großen Abdeckungsbereich von 43 x 43 cm, ultraschnelle Aufnahmezeiten und eine erstaunliche Auflösung von 9,4 Megapixeln.

Veterinärspezifischer Arbeitsablauf

iFast – Ein- und Ausschalten mit nur einer Taste

- ▶ Vereinfacht den Betrieb und reduziert Fehler

iSolo – Arbeitsablauf mit nur einem Bediener

- ▶ Der gesamte Untersuchungsprozess auf einer Plattform

iShotHelper – professionelle Positionierungshilfe

- ▶ Bietet detaillierte Anleitungen für eine präzise Positionierung

iVocal – sprachgesteuerte Belichtung

- ▶ Ermöglicht die Belichtungssteuerung per Sprache

Fortschrittliche Bildgebungstechnologie

Das System stellt geeignete Bildbelichtungsparameter für verschiedene Tiere zur Verfügung und intelligente Algorithmen optimieren die Parameterkombinationen automatisch.

- ▶ Grafische Oberfläche für Hunde, Katzen etc.
- ▶ Freie kV-, mA- und mAs-Parameterkombination

Professionelle Veterinär-Bildgebungs-Workstation

Der integrierte Arbeitsplatz mit großem LED-Display ermöglicht einen einfachen und effizienten Arbeitsablauf.

- ▶ Professionelles Veterinär-Toolkit
- ▶ LAN / WLAN Verbindung
- ▶ DICOM 3.0

Tischstativ

Die „schwimmende“ Tischplatte mit elektromagnetischen Bremsen vereinfacht die Positionierung erheblich.

- ▶ Stromversorgung: 220 Volt
- ▶ Fußschalter inkl. 3 m Kabel
- ▶ Maße (in cm): L 150 x B 81 x H 190

701150

~~€ 34.900,-~~

€ 27.995,-

Leasing* € 20,50 pro Tag für 54 Monate

Installation & Einweisung

S701150

€ 995,-



EICKEMEYER® PAWSITIONER LAGERUNGSHILFEN

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Lagerungshilfe zur sicheren Lagerung bei Operationen und bildgebenden Verfahren (Röntgen, Ultraschall, CT, MRT). Mithilfe des Pawsitioners lassen sich die Tiere optimal fixieren. Insbesondere lassen sich die Patienten leichter von der OP-Vorbereitung in den OP oder zu bildgebenden Geräten transportieren.

Jede Pawsitioner Lagerungshilfe ist perfekt auf die jeweilige Tiergröße abgestimmt. Durch die schnelle und sichere Fixation werden Röntgenaufnahmen erleichtert und die Strahlenbelastung reduziert, da das Halten der Tiere entfällt.

- Viele Fixationsmöglichkeiten durch Klettbander
- Röntgendurchlässig

Set komplett:

- Bestehend aus allen 5 Lagerungshilfen, 16 Klettbandern und Wandhalterung

605920

~~€ 1.095,-~~

€ 995,-



QR-Code zum
Anwendungsvideo
des Pawsitioners

EICKEMEYER® DOPPLER

Der EICKEMEYER® Doppler wird bei der zuverlässigen, nicht-invasiven Bestimmung des systolischen Blutdrucks bei Kleintieren verwendet. Die Messung erfolgt an oberflächlichen Arterien.

- Hohe Empfindlichkeit für ein klares Signal
- Mit Lautstärkenregulierung und Kopfhöreranschluss
- Netzunabhängiger Betrieb (Akku): ca. 6 Stunden
- Inkl. konkaver 8 MHz-Sonde für die Positionierung an der Carpus- (Vorderfuß-Wurzelgelenk) oder der Schwanzunterseite des Tieres
- Sonde mit großem Schallbereich für besseres Auffinden des Blutflusses
- Dient zusätzlich zur akustischen Überwachung des Blutflusses bei Narkosen
- Inkl. 250 g EICKEMEYER® Ultraschallgel

Technische Daten

- Ultraschallfrequenz: 8 MHz
- Maße (in cm): L 17,5 x B 8 x H 2,5
- Gewicht inkl. Akkus: 300 g

217210

Sphygmomanometer

- Inkl. 2 Klettmanchetten
5 cm / 7 cm

217309

Blutdruckmanschette 1,9 cm

- Speziell für kleine Katzen

217307

Blutdruckmanschette 3,3 cm

- Speziell für Katzen und kleine Hunde

217308

Blutdruckmanschette 10 cm

- Speziell für große Hunde

217311

Doppler + Sphygmomanometer inkl. 5 Manschetten

A217210

~~€ 1.153,80~~

€ 995,-



217210

ICARE TONOVET PLUS TONOMETER

iCare TONOVET Tonometer basieren auf einer einzigartigen, patentierten Rebound-Technologie, bei der eine sehr leichte und kleine Sonde verwendet wird, um einen kurzzeitigen Kontakt mit der Hornhaut herzustellen.

- ▶ Kurzes, schmerzloses und angstfreies Messen
- ▶ Assistierendes Positionslicht
- ▶ Klares und vergrößertes Farbdisplay
- ▶ Automatische Messoption mit höherer Genauigkeit
- ▶ Keine Kalibrierung notwendig
- ▶ Maße (in mm): L 215 x B 24–29 x H 35–95
- ▶ Gewicht: 230 g (inkl. Batterien)
- ▶ Lieferumfang: Transportkoffer, 100 Einweg-Prüftips, 4x AA Batterien

173620

~~€ 3.395,-~~

€ 2.895,-

Leasing* € 2,47 pro Tag für 48 Monate

Halterung für TONOVET Plus

- ▶ Zur Tisch- oder Wandbefestigung

1736008

~~€ 99,-~~

€ 79,-


Einweg-Prüftips für TONOVET Plus

- ▶ Packung mit 100 Stück

1736006

~~€ 119,95~~

€ 99,95

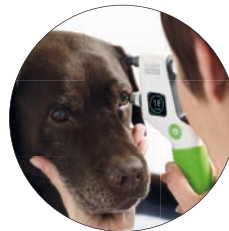

Anwendung



ICARE TONOVET PRO TONOMETER

Die innovative „Quick Measure“-Funktion ermöglicht eine schnellere sowie einfachere Messung des IOP und verkürzt die Untersuchungszeit erheblich. Durch die 200-Grad-Positionierungsfreiheit wird das TONOVET Pro auch in Notfallsituationen zum unverzichtbaren Helfer.

- ▶ Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- ▶ 200-Grad-Positionierungsfreiheit (ideal auch bei großen Tieren z. B. Pferden)
- ▶ Reaktionsschnellerer Prüftip
- ▶ Bessere Prüftipkontrolle verbessert die Genauigkeit
- ▶ Dem Benutzer zugewandtes Display
- ▶ Kabelloses Drucken über Bluetooth
- ▶ Maße (in mm): L 214 x B 43 x H 104
- ▶ Gewicht: 225 g (inkl. Batterien)
- ▶ Lieferumfang: Transportkoffer, 100 Einweg-Prüftips, 4x AA Batterien

173625

~~€ 4.595,-~~

€ 3.895,-

Leasing* € 3,33 pro Tag für 48 Monate

Halterung für TONOVET Pro

- ▶ Zur Tisch- oder Wandbefestigung

173626

~~€ 99,-~~

€ 79,-

Einweg-Prüftips für TONOVET Pro

- ▶ Packung mit 100 Stück

1736006

~~€ 119,95~~

€ 99,95



Anwendung



HEINE OMEGA 600 INDIREKTES OPHTHALMOSKOP

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Mehr entdecken. Mit weniger Gewicht.

Das OMEGA 600 ist besonders komfortabel und definiert zudem technologisch eine neue Klasse: unter anderem mit dem einzigartigen visionBOOST für eine signifikant bessere Diagnose selbst bei fortgeschrittenem Grauen Star.

Das leichteste indirekte High End Ophthalmoskop weltweit

- ▶ Individualisierbare Passform für höchsten Tragekomfort
- ▶ Für Rechts- und Linkshänder einstellbar
- ▶ Flip-up Funktion der Optikeinheit

Treffsichere Diagnose bis in die Fundusperipherie

- ▶ Bis zu 20 % bessere Sicht mit visionBOOST
- ▶ Schärfstes Fundusbild durch überlegene Optik aus Glas
- ▶ Helle und gleichmäßige Ausleuchtung des Fundus dank LEDHQ
- ▶ Beste 3D-Bildgebung dank stereoskopischer HEINE Technologie

Langlebiges Investment aufgrund robuster Verarbeitung

- ▶ Wartungsfreie, staubdichte Optik
- ▶ Einfache Reinigung dank smoothSURFACE
- ▶ 100 % Made in Germany
- ▶ 5 Jahre Garantie

173497

~~€ 3.176,-~~

€ 2.695,-

Leasing* € 2,30 pro Tag
für 48 Monate



OPTOMED AURORA® IQ FUNDUSKAMERA

Die patentierte AURORA® IQ Funduskamera ist ein tragbares High-End-Gerät für die Netzhautbildgebung in der Veterinärmedizin. Die benutzerfreundliche Technologie und der große Bildschirm für die sofortige Anzeige hochwertiger Netzhautbilder, auch bei nicht-dilatierten Pupillen, machen das Gerät zu einem Muss für jeden Ophthalmologen. Die im Lieferumfang enthaltene Augenoberflächenlinse verfügt über einstellbare Beleuchtungsstärken, Farbbildgebung und Kobaltblau für die Fluoreszenzbildgebung.

- ▶ Nicht-mydriatische Anwendung in abgedunkeltem Raum möglich
- ▶ Schnelle Bildaufnahme mit Autofokus oder manueller Bedienung
- ▶ Echtzeit-Sichtbarkeit der Netzhaut
- ▶ Großer 4" Bildschirm
- ▶ Detaillierte Untersuchung mit 50° Sichtfeld
- ▶ Einstellbare Beleuchtungsstärken
- ▶ Übernahme in die digitale Patientenakte über WLAN und USB
- ▶ 2 Jahre Garantie (exkl. Batterien)
- ▶ Lieferumfang: AURORA® IQ, Netzhautmodul, Anterionmodul, 2 Akkus, Netzteil, Reinigungstuch, 2 Augenmuscheln, Ladestation, USB-Kabel, Client-Software und Tragetasche

Technische Daten

- ▶ Sichtfeld: 50° (Gesamtsichtfeld: 50 x 40)
- ▶ Auflösung des Kamerasensors: 5 MP
- ▶ Bildformat: JPEG
- ▶ Videoformat: MPEG-4
- ▶ Speicher: 16 GB
- ▶ Li-Ionen-Akku, Akkulaufzeit bis zu 2 Std.
- ▶ Konnektivität: WLAN und USB
- ▶ Gewicht Kamera: 526 g

173497

~~€ 8.995,-~~

€ 7.650,-

Leasing* € 6,41 pro Tag für 48 Monate



KOWA SL-19 HANDSPALTLAMPE

Ergonomisch und leicht!

Die SL-19 sorgt mit ihrer rundgehaltenen Form und dem geschwungenen Griff mit optimiertem Griffdurchmesser für eine optimierte Ergonomie. Zudem sorgt das geringe Gewicht der Handspaltlampe für eine deutliche Entlastung beim Halten.

- ▶ LED Hintergrundbeleuchtung, die gleichzeitig mit dem Spaltlicht eingesetzt werden kann
- ▶ LED Blaulichtbeleuchtung für die Fluoreszenzbeobachtung
- ▶ Stufenlos einstellbare Schlitzlänge (1,5 – 12 mm)
- ▶ Bis zu 6 Stunden Betriebszeit mit 3x AA Batterien

Technische Daten

- ▶ Vergrößerung: 10x und 16x
- ▶ Arbeitsabstand: ca. 80 – 100 mm
- ▶ Spaltbreite: Ø 0,1, Ø 0,2, Ø 0,8 mm
- ▶ Spatllänge stufenlos einstellbar von 1,5 – 12 mm
- ▶ Spotgröße: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm
- ▶ LED Lichtintensität: 200 – 20.000 Lux (stufenlos verstellbar)
- ▶ Stromversorgung: 3x AA Batterien (DC 4,8 – 6,4 V)
- ▶ Gewicht (ohne Batterien): 620 g
- ▶ Auch in schwarz (173691), blau (173692), grün (173693) und rosa (173694) erhältlich

173690

~~€ 4.195,-~~

€ 3.495,-

Leasing* € 2,98 pro Tag für 48 Monate

Koffer für KOWA SL-19 Handspaltlampe

- ▶ Maße (in cm): L 37 x B 26,1 x T 8,5

173695

€ 219,-



173690

KOWA SL-19 PLUS HANDSPALTLAMPE

Die neueste Weiterentwicklung aus dem Hause KOWA, die Handspaltlampe SL-19 plus, besticht durch eine integrierte, hochauflösende Kamera. Mit einer einfachen Handbewegung können während der Untersuchung Videos aufgezeichnet werden, die automatisch über WLAN an ein iPad übertragen werden. Mithilfe einer speziellen Anwendungssoftware können diese Videos auf dem iPad analysiert und weiterverarbeitet werden. So können aus den Videos auch hochauflösende Standbilder extrahiert werden, welche einzeln ausgewählt, gespeichert und weitergeleitet werden können. Mit der neuen KOWA SL-19 plus Handspaltlampe werden Ihre Untersuchungsergebnisse immer optimal analysiert und dokumentiert.

Technische Daten

- ▶ Vergrößerung: 10x
- ▶ Arbeitsabstand: ca. 100 mm
- ▶ Effektives Sichtfeld: Ø 15 mm bei 10-facher Vergrößerung
- ▶ Spotgröße: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm
- ▶ Spatllänge stufenlos einstellbar von 1,5 – 12 mm
- ▶ Lichtintensität: 200 – 20.000 Lux (stufenlos verstellbar)
- ▶ Stromversorgung: 3x AA Batterien (DC 4,8 – 6,4 V)
- ▶ Gewicht (ohne Batterien): 730 g

173696

~~€ 8.495,-~~

€ 7.495,-

Leasing* € 6,28 pro Tag für 48 Monate

Koffer für KOWA SL-19 plus Handspaltlampe

- ▶ Maße (in cm): L 37 x B 26,1 x T 8,5

173697

€ 269,-



173696

CRYOPEN XPS KRYOCHIRURGIEGERÄT

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Kryochirurgie auf den Punkt gebracht

Der CryoPen XPS ist ein hochpräziser Kryotherapie-Stift zur Behandlung von Hautläsionen und kleinen Tumoren – ganz ohne Anästhesie. Mit seinem feinen, unter Hochdruck abgegebenen Strahl ermöglicht er millimetergenaues Arbeiten bei maximaler Kontrolle. Er eignet sich somit besonders für den Einsatz in der Ophthalmologie und überzeugt durch Effizienz und Vielseitigkeit.

- ▶ Hochmoderne Mikrotechnologie für kontrollierten Gasfluss
- ▶ Ultrafein und präzise
- ▶ Leicht zu wechselnde 8 g N₂O-Kartuschen
- ▶ Aluminiumgehäuse mit 2 Mikro-Applikatoren
- ▶ Für eine intensive und gleichzeitig schonende Gefrierleistung
- ▶ Einsatz bei Läsionen, Adenome, Distichiasis, Epulis, Adenome der Augenlider, Meibom- Drüsenfunktionsstörung, Sarkoidose, Warzen und andere Arten von Läsionen sowie gutartige Tumore und Karzinome

Technische Daten

- ▶ Konstante Behandlungstemperatur: -89 °C / -128 °F
- ▶ Inkl. 2 autoklavierbare Applikatoren: blau, 1 – 3 mm und weiß, 2 – 4 mm
- ▶ Inkl. 12x 8g Kartuschen
- ▶ Gewicht Gerät mit voller Patrone: 200 g

173420

€ 3.145,-



72
Kartuschen
GRATIS

NEU

AKTION

Cryopen XPS	€ 3.145,-
+ 3x 24 Kartuschen	€ 504,-
A173420	€ 3.649,-

€ 3.145,-

Leasing* € 2,68 pro Tag, 48 Monate

GESPART
14 %

RETEVET™ TRAGBARES ERG

Das RETevet™ ist ein intuitiv bedienbares ERG-Gerät, mit dessen Hilfe Ophthalmologen und Forscher im Veterinärbereich Elektroretinogramme durchführen können, um die Funktion der Netzhaut von Tieren einfach und schnell zu messen.

- ▶ Klein, tragbar und batteriebetrieben
- ▶ Intuitive Benutzeroberfläche
- ▶ Echtzeitergebnisse
- ▶ Alle Blitze elektronisch gesteuert
- ▶ Externe Filter für schwache Blitze sind nicht erforderlich
- ▶ Einfache USB-Verbindung zu jedem PC
- ▶ Umfassende Berichte im PDF-Format
- ▶ Lokalanästhesie optional, je nach Patienten auch ohne möglich

Technische Daten

- ▶ RGB-LED-Technologie
- ▶ 15 Millionen Farbkombinationen
- ▶ Maße (in cm): 10,5 x 15,5
- ▶ Gewicht: 240 g
- ▶ Lieferumfang: Gerät, Dockingstation, 5 Jet Elektroden, 1 RM Einmalelektrode für Hunde, 10 Nadelelektroden, Schutzhülle, 3-poliges Elektrodenkabel, USB-Kabel, Netzteil

173610

€ 10.500,-

€ 8.995,-

Leasing* € 7,54 pro Tag für 48 Monate



EICKLOXX SMALL OSTEOSYNTHESESYSTEM

Das universelle polyaxiale Osteosynthesystem für Kleintiere

Das EickLoxx Small ist ein winkelstabiles Osteosynthesystem für Hunde und Katzen mit einem Gewicht bis ca. 15 kg.

Es besticht im Besonderen durch die multiaxiale Platzierung der passgenau geformten Schrauben und vereint somit die Vorteile von winkelstabilen Systemen und die Möglichkeit Schrauben schräg in einem Winkel von bis zu $\pm 15^\circ$ einzudrehen. Im Vergleich zur konventionellen Platten-Osteosynthese bietet der Einsatz eines winkelstabilen Systems (Fixateur Interne) wie dem EickLoxx Small den Vorteil einer raschen Frakturheilung bei verbesserter Implantatfestigkeit. Die Entfernung der Schrauben und Platten ist aus diesem Grund selten indiziert.

Die biologisch vorteilhaft aus Titan gefertigten Platten werden in drei verschiedenen Größen angeboten und können bedarfsgerecht zugeschnitten werden. Die Platten sind dank spezieller Werkzeuge in allen drei Ebenen biegsam. Titan macht bei schnittbildgebenden Nachuntersuchungen auch weniger Artefakte. Das EickLoxx Small System ist modular aufgebaut. Implantate und Grundinstrumentarium werden aus hochwertigen Grundmaterialien in Deutschland hergestellt.

185500

~~€ 6.495,-~~

€ 5.295,-

Leasing* € 4,44 pro Tag für 48 Monate



QR-Code zum
Anwendungsvideo
des EickLoxx Small

EICKLOXX SMALL CONTOUR PLATTENSET

Das EickLoxx Small Contour Plattenset umfasst diverse anatomisch vorgeformte Osteosyntheseplatten für die Versorgung von Frakturen am distalen Radius und Femur, Ilium, Acetabulum und für Arthrodesen am Carpus und Tarsus. Es ergänzt die zuschneidbaren Platten des EickLoxx Small Osteosynthesystems und ist somit ebenfalls für die Versorgung von Katzen und Hunde bis 15 kg ausgelegt. Das Instrumentarium aus dem EickLoxx Small System findet analoge Anwendung.

Es gibt zwei Plattenstärken: Die 2,2 mm Titanplatten (gelb, grün und magenta) können mit den 1,7 mm sowie 2,3 mm Schrauben und die 3,0 mm Titanplatten (hellblau) wahlweise mit den Schrauben 2,7 mm, 3,5 mm sowie 4,0 mm der EickLoxx Reihe polyaxial verriegelt werden.

Trotz Konturierung können die Platten bei Bedarf mit den Schränkeisen und / oder der Plattenbiegezange mit Rollen gebogen und mit der Schneidezange gekürzt werden.

Die Siebschale mit den EickLoxx Small Contour Platten passt in den Container Art. Nr. 185555 auf die beiden Siebschalen des EickLoxx Small Osteosynthesystems.

197900

~~€ 1.895,-~~

€ 1.595,-

Leasing* € 1,39 pro Tag für 48 Monate



KNOCHENANKER-SET

Höchste Ausrissfestigkeit für eine präzise, sichere Band- und Sehnenrekonstruktion

Das Knochenanker-Set ist ein innovatives, schraubengewinde-basiertes Ankersystem für die tiermedizinische Rekonstruktion von Bändern und Sehnen bei Kleintieren. Es überzeugt durch maximale Stabilität, punktgenaue Platzierung und ein durchdachtes Design für eine sichere Anwendung speziell angepasst an unterschiedliche Tiergrößen von Katzen bis hin zu großen Hunderassen.

- ▶ Hohe Ausrissfestigkeit: Übertrifft klassische Hakenanker und andere Ankersysteme deutlich
- ▶ Titanmaterial: Sorgt für hohe Biokompatibilität und Infektionsresistenz
- ▶ Selbstbohrend & selbstschneidend: Einfache Handhabung nach initialer Perforation mit KIRSCHNER-Draht
- ▶ Vielseitige Schraubengrößen: Durchmesser von Ø 1.3 mm bis Ø 2.8 mm, in verschiedenen Längen erhältlich
- ▶ Doppelkopfbohrung: Ermöglicht den Einsatz mehrerer Fäden durch denselben Ankerkopf – prä- oder intraoperativ mithilfe der Einfädelhilfe
- ▶ Abgerundetes Kopfdesign: Minimiert das Risiko von Fremdkörperreaktionen – im Gegensatz zu herkömmlichen, klassischen Schraubenköpfen mit Unterlagscheiben
- ▶ Ideal für den Seitenbandersatz an Carpus, Tarsus, Ellbogen und Knie

Das Komplettsset enthält alle notwendigen Komponenten für eine sofortige Anwendung – inklusive verschiedener Ankerschrauben-Größen und Einfädelhilfe.

198200

~~€ 2.095,-~~

€ 1.795,-

Leasing* € 1,56 pro Tag
für 48 Monate

NEU



ORTHOVET PRO AKKU-BOHRMASCHINE

Das ideale Instrument für die Kleintier-Osteosynthesebehandlung

Die OrthoVet PRO Akku-Bohrmaschine ist ein akkubetriebenes Motorensystem für die veterinärmedizinische Osteosynthese in der Kleintierchirurgie. Das modulare System besteht aus einem Handstück mit bürstenlosem Motor und vier Aufsätzen, die durch eine schlüssellose Schnellkupplung auch intraoperativ in nur wenigen Sekunden gewechselt werden können.

Handstück und Aufsätze können sterilisiert/autoklaviert werden. Der Li-Ion-Akku ist nicht autoklavierbar und wird mithilfe eines Trichters ins Handstück eingesetzt. Der stufenlose Betrieb ist im Rechts- und Linksgang sowie mit dem Sägeaufsatz im Oszillationsschneidebetrieb möglich.

- ▶ 4 Aufsätze: Jacobs-Bohrfutter, AO-Schnellspannfutter, Schnellspannfutter für KIRSCHNER-Bohrdrähte, Oszillierende Säge mit Sägeblättern
- ▶ Längsdurchbohrt
- ▶ Autoklavierbar
- ▶ Inkl. 2 Li-Ion-Akkus mit Ladegerät, Transportkoffer

Technische Daten

- ▶ Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit: 0–1.200 U/min
- ▶ Oszillationsschneidebetrieb: 0–16.000 ocs/min
- ▶ Akkutyp: Li-Ion
- ▶ Akkuladezeit: 180 min
- ▶ Gewicht (inkl. Akku): 933 g

195000

~~€ 4.695,-~~

€ 3.995,-

Leasing* € 3,41 pro Tag
für 48 Monate



DRAGONFLY AKKU-BOHRMASCHINE

Das leistungsstarke Motorsystem für die Kleintier-Osteosynthese

DRAGONFLY ist ein modulares Akku-Bohrsystem mit vier schnell wechselbaren Aufsätzen zum Schrauben, Fräsen, Bohren und Schneiden. Das schlanke Handstück verfügt über einen intuitiven Einhandmechanismus. AO-Aufsatz, Schnellspann- und Jacobs-Bohrfutter sind kanuliert und spannen bis 4,0 mm. Die Aufsätze laufen stufenlos im Links-/Rechtslauf sowie im Oszillationsmodus bis 1.350 U/min. Ergänzt wird das System durch eine oszillierende Säge mit bis zu 14.000 osc/min. Handstück und Aufsätze sind autoklavierbar. Die zentrale, nicht-autoklavierbare Antriebseinheit mit Li-Ion-Akku und Steuerelektronik sorgt für hohe Laufzeit und Lebensdauer. Die DRAGONFLY bietet die Performance klassischer Druckluft- oder Kabelsysteme – entwickelt und gefertigt in Deutschland.

Technische Daten

- ▶ Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit: 0 – 1.350 U/min
- ▶ Oszillationsschneidebetrieb: 0 – 14.000 osc/min
- ▶ Akkutyp: Li-Ion
- ▶ Lieferumfang: DRAGONFLY Handstück inkl. AO-Aufsatz, Schnellspannbohrfutter, Jacobs-Bohrfutter, oszillierende Säge, 4 Sägeblätter mit STRYKER-Ansatz, Antriebseinheit, Steriltrichter, Ladegerät und Transportkoffer

199500

~~€ 11.995,-~~

€ 9.995,-

Leasing* € 8,38 pro Tag für 48 Monate

NEU
TPLO-Aufsatz
verfügbar ab
Ende 2025



HEINE NT4 LED DIAGNOSTIK-SET

Das hochwertige Diagnostik-Set speziell für die Veterinärmedizin.

Die HEINE BETA4 NT Laderiffe und das NT4 Tisch-Ladegerät garantieren längere Akkulaufzeiten, da die Li-Ion-Akkus keinen Memory-Effekt haben und nicht überladen werden können. Die exklusive LED-HQ-Beleuchtung der Instrumente bietet eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer – HEINE Quality Made in Germany.

Set komplett, bestehend aus:

- ▶ 2x HEINE BETA4 NT Ladegriff
- ▶ HEINE NT4 Tisch-Ladegerät
- ▶ HEINE BETA 200 LED Ophthalmoskop
- ▶ HEINE G100 LED Geschlitztes Kopfstück
- ▶ Veterinär-Spekulum aus Metall, geschlossen, L 57 mm, Ø 4 mm
- ▶ Veterinär-Spekulum aus Metall, geschlossen, L 65 mm, Ø 6 mm
- ▶ Veterinär-Spekulum aus Metall, geschlossen, L 90 mm, Ø 7 mm

302554

~~€ 1.490,-~~

€ 1.250,-

Leasing* € 1,09 pro Tag für 48 Monate



EICKVIEW OTO DIGITALES VIDEO-OTOSKOP

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

Das EickView OTO bietet eine kompakte, leistungsstarke Lösung für die digitale Otoskopie bei Kleintieren. Die Kombination aus HD-Kamera, Wifi-Technologie und vielseitigem Zubehör ermöglicht die präzise Untersuchung des äußeren Gehörgangs sowie anderer kleiner Körperregionen – entweder kabellos oder kabelgebunden. Das EickView OTO ist für routinemäßige Ohruntersuchungen, prä- und postoperative Kontrollen sowie weitere Anwendungen in der Dermatologie vorgesehen.

Technische Daten

- ▶ HD-Kamera: 3,9 mm, 6 LEDs, 78° Weitwinkel
- ▶ Zoom: 1 – 1,5x
- ▶ Fokus: 10 – 50 mm
- ▶ Bildschirm: 1,85" IPS LCD
- ▶ Auflösung: 720 x 720 px
- ▶ 8 GB interner Speicher
- ▶ Helligkeit in 3 Stufen regulierbar (hell, mittel, aus)
- ▶ Verbindung: kabellos (Android/iOS) oder über USB-C
- ▶ Lieferumfang: EickView OTO, Transportkoffer, USB-Kabel zur Datenübertragung und Laden, Zungenspatel, Derma-Aufsatz, Silikon-Ohrenschildhülse, Silikonhülse mit 2,0 mm Arbeitskanal, Biopsiezange (Ø 1,8 mm, Länge 280 mm)

300130

~~€ 419,-~~

€ 349,-



Anwendung



FREEZPEN 16G

Freezpen – Kryochirurgie leicht gemacht

Freezpen vereint modernste Mikrotechnologie und ergonomisches Design und macht Kryochirurgie einfacher, präziser und zugänglicher denn je.

- ▶ Einfache, stressfreie Entfernung von Hautläsionen und kleinen Tumoren ohne Anästhesie
- ▶ Einfache Behandlung von Läsionen und Tumoren am Körper, an den Beinen, im Mund, an der Nase, an den Ohren oder im Augenbereich

Technische Daten

- ▶ Behandlungstemperatur: -89 °C / -128 °F
- ▶ Druck: 50 – 55 bar
- ▶ Inkl. 3 autoklavierbare Applikatoren:
 - Blau: Ø 1 – 3 mm (230 – 270 Sekunden Fließzeit)
 - Weiß: Ø 2 – 6 mm (145 – 180 Sekunden Fließzeit)
 - Grün: Ø 4 – 8 mm (110 – 130 Sekunden Fließzeit)
- ▶ Inkl. Starterset mit 6 Stück 16G N₂O Kartuschen

173400

€ 1.895,-



36
Kartuschen
GRATIS

GESPART
19%

AKTION

Freezpen 16G	€ 1.895,-
+ 3x 12 Kartuschen	€ 432,-
A173400	€ 2.327,-

€ 1.895,-

Leasing* € 1,65 pro Tag, 48 Monate

MOTIC B1 ELITE LED MIKROSKOP

Die MOTIC Mikroskop B1-Serie bietet seit langem eine starke, solide Basis für professionelle Anwendungen. Das B1 Elite Mikroskop wurde mit neuen Optiken und Mechaniken aufgerüstet, die normalerweise nur in teureren Modellen zu finden sind.

- Binokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weitfeld Okulare mit Dioptrieneinstellung ± 5
- Augenmuscheln mit 55 – 75 mm Augenabstand
- Semi-Plan Objektive 4x 0,10, 10x 0,25, 40x 0,65, 100x 1,25 / Oil
- Koaxial betriebener Kreuztisch, 140 x 135 mm
- Fokussierbarer Abbe-Kondensor mit Schieberschlitz
- Regelbare 3 W LED-Beleuchtung

710003

~~€ 739,-~~ € 629,-



MOTIC DIGITALES MIKROSKOPSYSTEM

MOTIC LED Mikroskop BA210

Leistungsstarkes Labormikroskop für die Tierarztpraxis zur Routinebestimmung im Hellfeld, nachrüstbar für Phasenkontrast. Hervorragend geeignet für das tägliche Mikroskopieren im Labor.

- Trinokulartubus, Siedentopf Typ, 30° Einblickwinkel
- Weitfeld Okulare mit Dioptrieneinstellung ± 5
- Augenmuscheln mit 55 – 75 mm Augenabstand
- EC Plan Achromat Objektive 4x 0,10, 10x 0,25, 40x 0,65 / 100x 1,25 / Oil
- Koaxial betriebener Kreuztisch, 140 x 135 mm
- Fokussierbarer Abbe-Kondensor mit Schieberschlitz
- Regelbare 3 W LED-Beleuchtung

710014

~~€ 1.349,-~~ € 1.149,-

Leasing* € 0,95 pro Tag für 48 Monate



710025



710014

Moticam BTI

Die flexible Tablet-Lösung für die Mikroskopie, bestehend aus einer 4 MP Kamera und einer verstellbaren Halterung für Tablets (von 7" bis 10"). Mit der Moticam BTI können Sie sich auf Ihrem Tablet Livebilder Ihres Mikroskops ansehen, bearbeiten und teilen, ohne einen Computer verwenden zu müssen. Die aufsetzbare C-Mount Kamera kann über WLAN mit einem iOS- oder Android-Tablet verbunden werden. Die Software für Windows wird mitgeliefert, die MotiConnect App für iOS oder Android kann gratis aus dem AppStore heruntergeladen werden.

- Tablet-Halterung: Für iPad und Android-Tablets von 7" bis 10" (ohne Tablet)
- Bildaufnahme Auflösung: 4.0 MP (2.560 x 1.440 Pixel)
- Ausgang: WLAN, USB

710025

~~€ 595,-~~ € 495,-

GESPART
20%

AKTION

MOTIC LED Mikroskop BA210	€ 1.349,-
+ Moticam BTI	€ 595,-
+ C-Mount Adapter	€ 170,-
A710025	€ 2.114,-

€ 1.695,-

Leasing* € 1,47 pro Tag, 48 Monate

Saubere Luft für gesunde Tiere und Menschen – inklusive Narkosgasfilterung

Wie ist die Luftqualität in Ihrer Praxis?

In Tierarztpraxen wird die Luftqualität oft unterschätzt – dabei ist sie entscheidend für die Gesundheit von Patienten, Mitarbeitenden und Besuchern. Ob bei Operationen, Behandlungen oder der täglichen Reinigung: Unsichtbare Schadstoffe gelangen in die Raumluft und können ernsthafte gesundheitliche Risiken verursachen und die Gesamtleistung Ihrer Klinik beeinträchtigen. Der EOLIS Air Manager sorgt für eine effektive Luftreinigung und schafft ein sicheres, hygienisches Umfeld.

Typische Luftbelastungen in Tierarztpraxen:

- ▶ **VOC-Belastung** durch Narkose-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel (z. B. Isofluran, Sevofluran und Formaldehyd)
- ▶ **Pathogene Mikroorganismen** wie Bakterien, Viren und Schimmelpilze (z. B. Parvovirus, Calicivirus)
- ▶ **Fein- und Ultrafeinstaub** aus chirurgischen Verfahren (z. B. durch Elektrokauter, Laser)
- ▶ **Gerüche und Allergene**, die sich auf Textilien und Oberflächen festsetzen

Lösungen mit dem EOLIS Air Manager:

- ▶ Mehrstufiges Filtersystem: Biozider Vorfilter, HEPA-Spezialfilter, Aktivkohle, UV-C und Oxidation
- ▶ Deep-Clean-Funktion mit Aktivsauerstoff für intensive Raumluftreinigung in 60 Minuten
- ▶ Zertifizierte Entfernung von VOCs, Viren, Bakterien, Sporen, Feinstaub, Allergenen und Gerüchen
- ▶ Die Luftqualität wird ständig gemessen, sodass die Leistung in Echtzeit angepasst wird
- ▶ Ideal für Behandlungsräume, OPs, Wartebereiche und Personalzonen
- ▶ Freistehend, optional: Wandhalterung oder Trolley
- ▶ Hergestellt in Frankreich, 3 Jahre Garantie

EOLIS Air Manager 600S

- ▶ Max. aufbereitete Fläche (in m²): 60
- ▶ Maße (in cm): H 50,5 x B 38,5 x T 23
- ▶ Min./Max. Leistungsaufnahme (in W): 13 / 65
- ▶ Max. Luftsrom (in m³/h): 350
- ▶ Min./Max. Geräuschpegel (in dB): 18 ~ 52

503050

~~€ 2.995,-~~

€ 2.495,-

EOLIS Air Manager 1200S

- ▶ Max. aufbereitete Fläche (in m²): 120
- ▶ Maße (in cm): H 70,5 x B 39,5 x T 24
- ▶ Min./Max. Leistungsaufnahme (in W): 16 / 80
- ▶ Max. Luftsrom (in m³/h): 550
- ▶ Min./Max. Geräuschpegel (in dB): 18 ~ 59

503060

~~€ 3.695,-~~

€ 2.995,-

NEU



503050



503060

MELAG MELASEAL 100+ FOLIENSCHWEISSGERÄT

Kompakt, zuverlässig und leicht bedienbar

MELaseal 100+ ist ein robustes und platzsparendes Siegelgerät mit geringer Aufstellfläche. Nach einer kurzen Aufheizzeit von etwa 2 Minuten können die Folien ohne Pausenzeiten mit einer Siegelnahtbreite von 10 mm gesiegelt werden. Die Elektronik überprüft die Siegelzeit und die Siegeltemperatur. Bei Abweichungen erfolgen ein optisches und ein akustisches Signal.

Der stufenlose Thermostat ermöglicht die Verwendung von Verpackungen unterschiedlicher Hersteller. Mit dem integrierten Schneidmesser können während des Siegelvorgangs Beutel von einer Rolle (z. B. MELAfol) flexibel auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden.

Technische Daten

- ▶ Siegelnahtbreite: 10 mm
- ▶ Aufheizzeit: 120 Sekunden
- ▶ Maße (in mm): B 415 x T 240 x H 150
- ▶ Gewicht: 5,4 kg
- ▶ Mit Standard-Rollenhalter

501001

~~€ 895,-~~

€ 749,-



MELAG STERIHERO SPEED+ B-KLASSE AUTOKLAV

Der SteriHero Speed+ ist ein kompakter 5 Liter Autoklav der Klasse B und liefert bahnbrechende Performance, ein unglaublich unkompliziertes Bedienkonzept und extreme Flexibilität für die Veterinärmedizin. Der schnellste Kompakt-Autoklav der Welt ermöglicht die Sterilisation Ihrer Instrumente ab nur 6,5 Minuten (plus Trocknung).

Installation & Einweisung

S500023

€ 395,-

- ▶ Rekord-Zykluszeiten
- ▶ 60 % weniger Platzbedarf als herkömmliche Autoklaven
- ▶ Einfache Plug-and-Play-Installation
- ▶ Kammergröße (in cm): H 8 x B 20,3 x T 31
- ▶ Beladungsmenge: Max. 2 kg Instrumente / 0,45 kg Textilien
- ▶ Inklusive zwei Tablettis
- ▶ Maße (in cm): H 30 x B 30 x T 59
- ▶ Gewicht: 28 kg

500055

~~€ 2.595,-~~

€ 2.195,-

Leasing* € 1,74 pro Tag für 54 Monate

NEU



MELAG STERIHERO VET 23 S S-KLASSE AUTOKLAV

WEITERE
ANGEBOTE
ONLINE
www.eickemeyer.de

SteriHero Vet 23 S bietet ein noch heldenhafteres Preis-Leistungs-Verhältnis für veterinärmedizinische Praxen und Kliniken, die aufgrund der verwendeten Instrumente keinen Klasse B Autoklaven benötigen. Der Klasse S Autoklav garantiert durch das fraktionierte Vakuumverfahren sogar die sichere Sterilisation von verpackten Instrumenten mit einfachen Hohlkörpern (z. B. Gelenkinstrumente und Zangen).

- ▶ S-Klasse Autoklav für die sichere Sterilisation von verpackten und unverpackten Instrumenten ohne komplexe Hohlkörper
- ▶ Kurze Zykluszeiten ab 16 min
- ▶ Intuitives Bedienkonzept mit großem Smart-Touch-Display
- ▶ Leicht zu befüllender, integrierter Wassertank
- ▶ Halterung zur Aufnahme von 5 Tablett (3 enthalten)
- ▶ Kammervolumen: 23 l, T 45 cm, Ø 25 cm
- ▶ Maße (in cm): B 47 x H 50 x T 64
- ▶ Gewicht: 47 kg

500040

~~€ 3.995,-~~

€ 3.295,-

Leasing* € 2,56 pro Tag für 54 Monate

Installation & Einweisung

S500023

€ 395,-



MELAG STERIHERO VET 23 B-KLASSE AUTOKLAV

Ihre neue Superpower in der Veterinärmedizin

Egal welche großen Aufgaben der Tag für Sie bereithält, SteriHero Vet hält Ihnen den Rücken frei. Denn der Stand-alone Autoklav wurde speziell für die Veterinärmedizin entwickelt: Von den Funktionen bis zum Preis! Leistungsstarke Technologien, ein intuitives Smart-Touch-Display und die einzigartige MELAG Qualität – made in Germany – geben Ihnen die Superpower, alles zu verändern!

- ▶ B-Klasse Autoklav für die sicherste Sterilisation
- ▶ Hohe Beladepazitäten und kurze Zykluszeiten ab 16 min
- ▶ Effektive Vakuum-Schnelltrocknung
- ▶ Intuitives Bedienkonzept mit großem Smart-Touch-Display
- ▶ Leicht zu befüllender, integrierter Wassertank
- ▶ Halterung zur Aufnahme von 5 Tablett (3 enthalten)
- ▶ Kammervolumen: 23 l, T 45 cm, Ø 25 cm
- ▶ Maße (in cm): B 47 x H 50 x T 64
- ▶ Gewicht: 49 kg

500050

~~€ 5.495,-~~

€ 4.495,-

Leasing* € 3,50 pro Tag für 54 Monate

Installation & Einweisung

S500023

€ 395,-



EICKEMEYER ICU Intensivstation – Präzision trifft Effizienz

Die neue EICKEMEYER ICU ist eine kompakte High-End-Lösung für die intensivmedizinische Versorgung in Tierarztpraxen, Kliniken und Notfallstationen. Mit zwei separat steuerbaren, trennbaren Ebenen ermöglicht sie die gleichzeitige Behandlung von bis zu vier Patienten.

Beide Ebenen arbeiten unabhängig und bieten eine präzise Regelung von **Sauerstoff, CO₂, Temperatur und Luftfeuchtigkeit**. Ein digitales Überwachungssystem mit intelligenten Warnmeldungen sorgt für maximale Sicherheit. Das Gehäuse aus Edelstahl und die integrierte **Ionisierungs-Sterilisation** garantieren höchste Hygiene und leisen Betrieb – ideal für sensible Patienten.

Vorteile im Überblick

- ▶ **3D-Klimasteuerung:** Gleichmäßige Temperaturverteilung für ein stabiles Mikroklima.
- ▶ **O₂-/CO₂-Sensorik in Echtzeit:** Automatische Gaskontrolle für sichere Therapie – kompatibel mit zentraler Gasversorgung oder optionalem Konzentrator.
- ▶ **Luftreinigung mit Negativionen:** Entfernt bis zu 98 % der Partikel, reduziert Keime und Gerüche, fördert Ruhe und Immunfunktion.
- ▶ **UV-Quarz-Sterilisation:** Effektive Desinfektion (254 nm) zur Minimierung von Kreuzkontamination.
- ▶ **Therapeutisches Lichtsystem:** Warmlicht zur Beruhigung, Weißlicht zur Vitalzeichenkontrolle, Blaulicht zur Förderung kognitiver Funktionen und Entzündungshemmung.

Ob post-operative Betreuung, kontinuierliche Sauerstofftherapie oder das Wärmemanagement bei Jungtieren – die EICKEMEYER ICU vereint Präzision, Hygiene und Komfort in einem durchdachten System. Eine Investition, die Ihre Praxis nachhaltig stärkt.

Weitere Informationen

- ▶ Touchscreen Bedienung mit Echtzeitdaten
- ▶ Temperatursteuerung von 15 – 38 °C
- ▶ Sauerstoffkonzentration von 21 – 60 %
- ▶ CO₂ Monitoring mit Filtersystem
- ▶ Automatische Luftfeuchtigkeitssteuerung
- ▶ Maße (in cm): B 125 x T 66 x H 182
- ▶ Gewicht: ca. 236 kg
- ▶ Ab Januar 2026 lieferbar

219050

~~€ 16.500,-~~

€ 13.995,-

**Leasing* € 10,46 pro Tag
für 54 Monate**

NEU



*Leasingangebote der VetDirekt Leasing GmbH & Co. KG. Bonitätsprüfung vorbehalten.